


Moria #65065

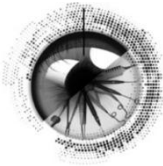

使用指南 ONE® 次性冲压刀 #17200DXXX

使用说明

Moria ONE® 系列的一次性冲压刀是用来完成层分和穿透角膜手术中角膜植片的。

装置部件

- 切割底座 (A), (见图. 1)
- 环钻刀片 (B), (见图. 1)
- 针筒 (C) (图. 1)

最新版本的资料及翻译本可以在 Moria 网站 (<http://www.moria-surgical.com>) 得到，需要注册。

警告

- 本说明书仅解释如何使用此医疗器械，并没有描述如何制作角膜植片的具体步骤。手术步骤可以按医生制作角膜植片的经验来完成。
- 检查包装袋的完整性。
- 检查包装上的有效期。
- ONE® 一次性负压冲压刀是已灭菌并供使用的。如果独立包装袋有破损，是不能被使用的。
- 此医疗器械是不允许被重复使用的。重复使用该器械，会影响临床表现以及将危及病人。

指南

- 1 / 检查标注在顶部的环钻刀片的直径。
 - 2 / 从袋装中移除灭菌泡。
 - 3 / 从包装袋中拿出底座，环钻刀片和针筒。
 - 4 / 用管子连接针筒，用 Luer™ 锁 (图 2)。
 - 5 / 在显微镜下检查环钻刀片的完整性。
 - 6 / 按压针筒活塞一半并且保持。
 - 7 / 放置植片在底座上，内皮面向上。
 - 8 / 使用底座4定位点使得植片在中心位置。
 - 9 / 释放活塞产生负压，以便使得植片在中心位置。检查植片的位置是否在中心。如果位置有偏离，重新操作步骤6-9。
 - 10 / 将环钻刀片放置在底座上，使得刀片仅因重力而下降，避免造成错误切割角度（有阻滞的风险）（图 3），并且按压切割角膜植片（图4）。
一边握住冲压刀，通过顶部的可视窗口用齿镊抓取巩膜，轻轻旋转完成切割（图 5）。
 - 11 / 轻轻地从底座上拿起环钻刀片。由于负压吸力，供体植片应该在底座上。然后完全移开环钻刀片。
 - 12 / 松开针筒连接，释放负压。供体植片可以备用了。
 - 13 / 在最后的步骤里，将环形刀片丢弃到适当的回收器皿中。
- (根据相关法律)

产品编号列表

产品编号17200Dxxx	
17200D600	一次性冲压刀 D600
17200D650	一次性冲压刀 D650
17200D675	一次性冲压刀 D675
17200D700	一次性冲压刀 D700
17200D725	一次性冲压刀 D725
17200D750	一次性冲压刀 D750
17200D775	一次性冲压刀 D775
17200D800	一次性冲压刀 D800
17200D825	一次性冲压刀 D825
17200D850	一次性冲压刀 D850
17200D875	一次性冲压刀 D875
17200D900	一次性冲压刀 D900
17200D950	一次性冲压刀 D950
包装	每盒一个，环氧乙烷灭菌，一次性使用

附件

产品编号	17202Dxxx
描述	One® 可调节负压冲压刀 直径从6.50 到9.00 mm 每0.25 mm 一档，也有6.00, 9.50, 10.00 mm
包装	每盒一个，环氧乙烷灭菌，一次性使用

图 1

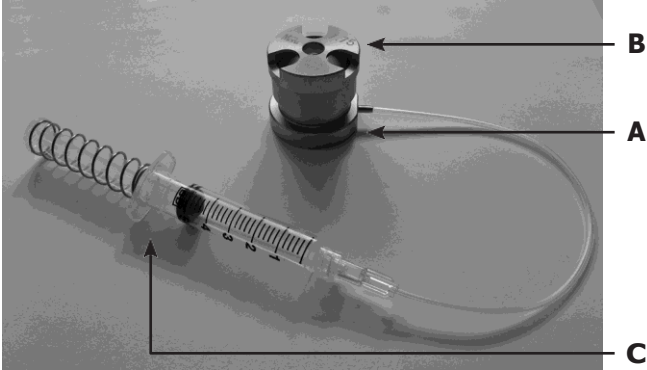


图 2

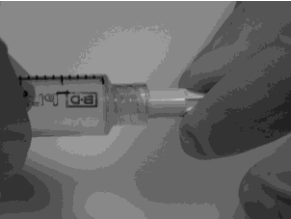


图 3



图 4



图 5



注册人/生产企业：MORIA S.A 法国目利亚股份有限公司
住所：27, rue du Pied de Fourche, F03160 Bourbon
L' Archambault, France
生产地址：27, rue du Pied de Fourche, F03160 Bourbon L' Archambault, France
联系电话：+33 (0)1 46 74 46 74 传真：+33 (0)1 46 74 46 00

代理人/售后服务单位：上海目利亚贸易有限公司
住所：上海市长宁区淮海西路432号6楼H室
联系方式：86 021 52586095

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进20173166477

生产日期：见标签
使用期限：见主机说明书

欲了解更多资讯

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
電話+33 (0)1 46 74 46 74
傳真+33 (0)1 46 74 46 00
moriam@moriam-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
電話(800) 441 1314
傳真 + 1 (215) 230 7670
orders@moriamusa.com
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
電話 81-3-6260-8309
傳真 81-3-6260-8310
moriam@moriamjapan.com
www.moriamjapan.com

**Moria COMMERCIAL
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
District, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼H室
電話/傳真 +86 021 52586095
moriam@moriam-int.com

Moria

MORIA 65065ZH-C-10.2026