



Can one-step astigmatism marker

Intended use

Can* pendular marker (#20033) is intended to mark the chosen angle axis on patient's eye(s) in the preoperative time. It is used for positioning toric intraocular lenses.

Accuracy


Accuracy of Can pendular marker is $\pm 1,5^\circ$.

Select the angle




- 1- Unscrew the pendulum half a turn.
- 2- Choose the angle by moving the arrow on the dial.
- 3- Screw the pendulum until it blocks.

Positioning and use of the instrument

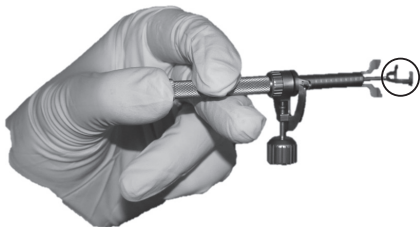

- 1- Put your index and middle fingers on each side of the handle.
- 2- Block the pivot rod with your thumb.
- 3- Put the centering tip on the eye and align it to the limbus of the cornea.
- 4- Move forward the handle so that the axis marker marks the eye.

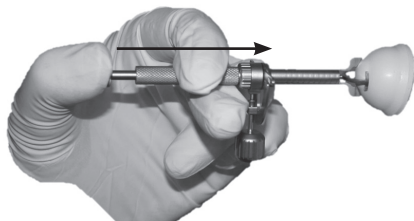

Do not angle the centering tip and the axis marker in the same side.

An alternative positioning is to hold the handle with the middle finger and the thumb, and use the index finger for the pivot rod.

Parts of the instrument



- ① Pivot rod
- ② Handle
- ③ Pendulum and dial
- ④ Axis marker
- ⑤ Centering tip

Maintenance

For maintenance, cleaning and sterilization please refer to reusable device instruction #65034. If necessary, the instrument can be disassembled and reassembled as shown below.


Disassembly

STEP 1




Hold the parts ① and ⑤ at the same time and unscrew the part ① by turning it anti-clockwise.

STEP 2

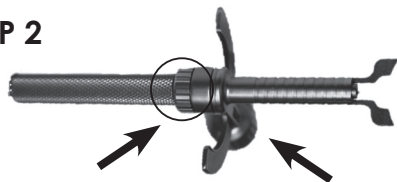

Unscrew the part ② from the part ③.
See surrounded area to unscrew the part ②.

STEP 3

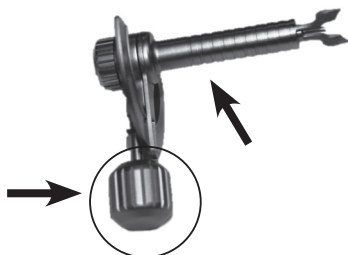

Unscrew the pendulum of the part ③ (2 turns only) and disassemble the part ④ from the part ③.

Please note that you have to proceed in the reverse order to reassemble the instrument



Marqueur en une étape pour astigmatisme du Dr. Can

Indication

Le marqueur pendulaire de Can* (#20033) est conçu pour reporter un angle choisi sur l'œil du patient en préopératoire. Il est utilisé pour positionner des implants toriques.

Précision


La précision du marqueur pendulaire de Can est de $\pm 1,5^\circ$.

Choix de l'angle




- 1- Dévissez le pendule d'un demi-tour.
- 2- Choisissez l'angle en tournant la flèche sur le cadran.
- 3- Vissez le pendule jusqu'à ce qu'il bloque.

Position et utilisation de l'instrument

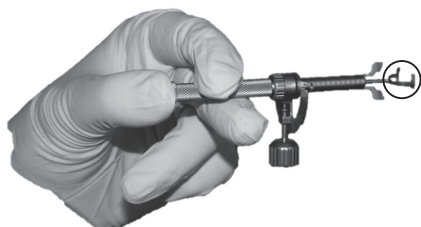


- 1- Placez votre index et votre majeur de chaque côté du manche.
- 2- Bloquez la tige de pivotement avec votre pouce.
- 3- Placez l'embout de centrage sur l'œil et l'aligner avec le limbe cornéen.
- 4- Avancer le manche afin que l'axe de marquage touche l'œil.

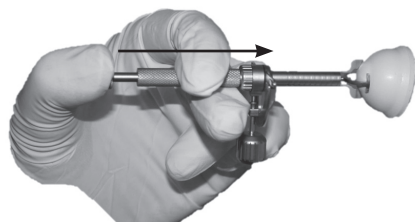

Ne pas orienter l'embout de centrage et l'axe de marquage dans le même sens.

Une autre position est de tenir le manche avec le pouce et le majeur, et d'utiliser l'index pour la tige.

Constitution de l'instrument

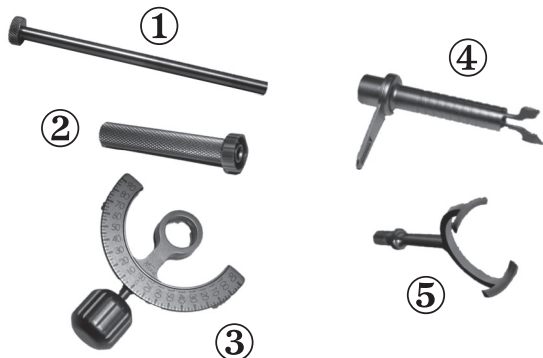

- ① Tige de pivotement
- ② Manche
- ③ Pendule et Cadran
- ④ Axe de marquage
- ⑤ Embout de centrage

Maintenance

Pour l'entretien, le nettoyage et la stérilisation se reporter à la notice des instruments réutilisables #65034. Si nécessaire, l'instrument peut être démonté et remonté comme expliqué ci-dessous.


Démontage

ETAPE 1



Tenir les parties ① et ⑤ et dévisser la partie ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


ETAPE 2

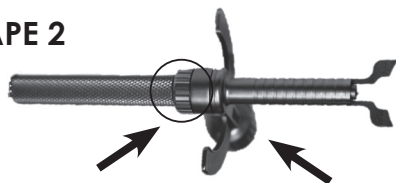

Dévisser la pièce ② de la pièce ③.

La partie à dévisser est indiquée par la zone entourée.

ETAPE 3

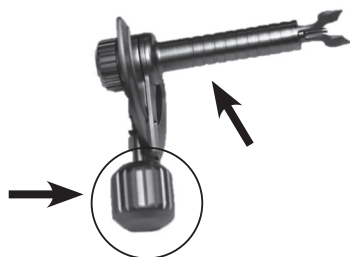

Dévisser le pendule (partie ③) sur deux tours et désassembler la partie ④ de la partie ③.

Veuillez procéder dans le sens inverse afin de réassembler l'instrument

To obtain more information

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon l'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0) 4 70 67 09 04
Fax: +33 (0) 4 70 67 06 61
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

MORIA JAPAN KK
Inami Bldg. 6F
3-24-2 Hongo Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
JAPAN
Phone: +81 3 5842 6761
Fax: +81 3 5842 6762
www.moriajapan.com

Moria Shanghai Office
RM4, 10 FL, Kai Li Building
N°432 Huai Hai West Road
200052 Shanghai
CHINA
Phone: +86 21 5258 5068
Fax: +86 21 5258 5067
www.moria-surgical.com.cn

Moria