


EN - Nomogram for One Use-Plus with plastic ring	2
FR - Nomogramme pour One Use-Plus avec anneau plastique	4
ES - Nomograma para One Use-Plus con anillo de plástico de uso único	6
IT - Nomogramma per One Use-Plus con anello di suzione in plastica monouso ...	8
DE - Nomogramm für One Use-Plus Einweg-Kunststoffring	10

NL - Nomogram voor One Use-Plus met Plastic ring voor eenmalig gebruik	12
PT - Nomograma para One Use-Plus Anel plástico descartável	14
SV - Nomogram för One Use-Plus Plastring för engångsanvändning	16
TR - Plastik halka One Use-Plus için Nomogram	18

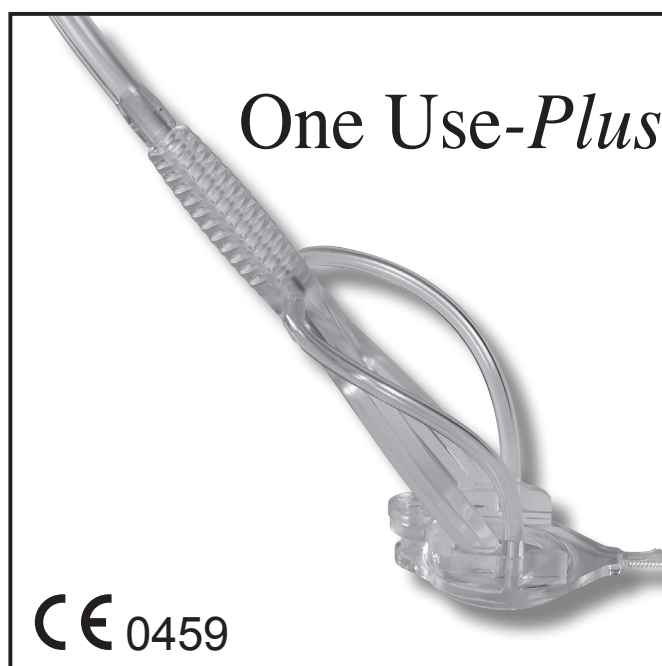

One Use-Plus


SBK
130

Ref.: 65041



Moria

EN - NOMOGRAM FOR One Use-Plus
WITH PLASTIC RING

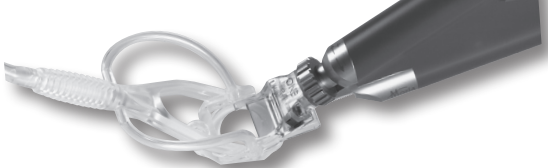

Average K	Ring size	Calibrated Head	Stop value	Flap Diameter (assumptions)	Stroma available for ablation (calculations)	Hinge size (calculations)	Cautions
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7.75	9.3 - 9.4 9.3 - 9.4	8.7 8.5 - 8.6	4.7 - 4.9 5.1 - 5.3	Not for corneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7.5	8.8	8.0	4.6	Caution small hinge. Corneas > 12 mm may decrease flap by 0.25 mm
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7.75	9.5 - 9.6 9.5 - 9.6	8.8 8.5 - 8.7	5.1 - 5.3 5.5 - 5.7	Not for corneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7.50	9.0	8.3	5.0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7.75	9.8 - 9.9 9.8 - 9.9	8.9 - 9.0 8.8	5.7 - 5.8 6.0 - 6.2	Not for corneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7.5	9.3	8.4	5.5	
	0	90 130	7.5	8.8	8.1	4.6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.25 8	10.0 - 10.1 10.0 - 10.1	9.1 - 9.2 9.0 - 9.1	5.7 - 5.8 6.0 - 6.2	Not for corneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7.75	9.5	8.6	5.5	
	0	90 130	7.5	9	8.3	5.0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.5 8.25	10.3 - 10.4 10.3 - 10.4	9.4 - 9.5 9.3	5.8 - 6.0 6.2 - 6.3	Not for corneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9.8	8.9	5.7	
	0	90 130	7.5	9.3	8.4	5.5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.75 8.5	10.5 - 10.6 10.5 - 10.6	9.6 - 9.7 9.5 - 9.6	4.5 - 6.0 4.5 - 6.2	Not for corneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8.25	10	9.1	4.4	Caution of corneas < 11 mm Lubricate well, and make slower pass (Speed 1).
	0	90 130	7.75	9.5	9.0	5.5	
45	-1	90 130	8.5	10.3	9.4	5.8	Caution of corneas < 11 mm Lubricate well, and make slower pass (Speed 1).
	0	90 130	8	9.8	9.2	4.7	
46	0	90 130	8	10	9	6.0	
47	0	90 130	8.25	10.3	9.3	6.2	Caution of corneas < 11 mm Lubricate well, and make slower pass (Speed 1).
48	0	90 130	8.5	10.5	9.5	6.2	Caution of corneas < 11 mm Lubricate well, and make slower pass (Speed 1).


Refer to associated user manual #65039
The most recent version of the nomogram is available on the MORIA website:
<http://www.moria-surgical.com>

Center the suction ring on the limbus when using these stop and ring combinations.
Determine the average K, round the value to the nearest whole number and select appropriate ring and stop (for $42.5 \leq K < 43.5$ round to 43).
For corneas greater than 11.5 mm in diameter, flap size will decrease by 0.25 mm.
For corneas less than 11.0 mm in diameter, flap size will increase by 0.25 mm.
Suggested combinations only- individual patient selection may vary.

Using the Nomogram

Moria does not recommend using the One Use-Plus for eyes with corneal thicknesses less than 500 microns.
Moria recommends to center the suction ring on the limbus.

The most recent version of the nomogram is available on the MORIA website:
<http://www.moria-surgical.com>

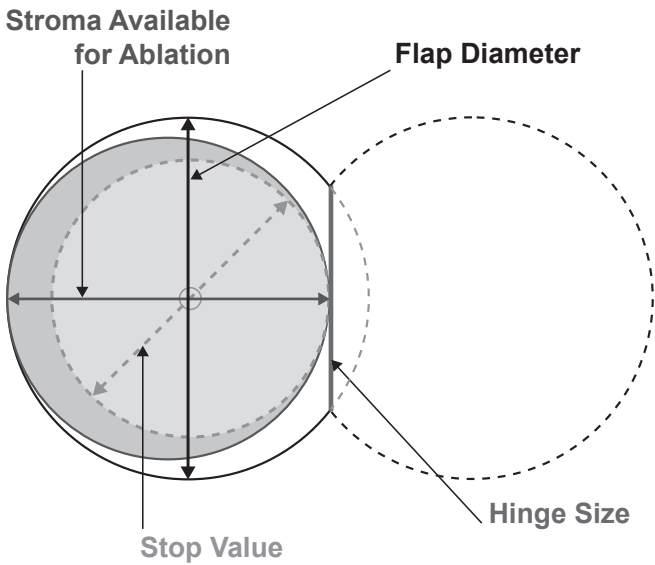

Performance may deviate from the nomogram depending on several patient-related factors (IOP, degree of myopia, age, gender, ethnicity, keratometry, etc.) and surgery-related factors (corneal hydration, suction time, etc.). The nomogram is a general guide only. It is strongly recommended that every surgeon establish his own nomogram. Moria shall not be responsible for any direct, incidental, consequential or exemplary damage suffered by any party, even if that party has not been advised of the possibility of such damage.



K moyenne	Anneau	Tête de découpe	Butée	Diamètre du Flap (estimations)	Diamètre de stroma disponible (calculs)	Taille de la charnière (calcul)	Prudence
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Prudence pour les cornées ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Prudence petite charnière Cornée > 12mm possible réduction du diamètre du flap de 0,25 mm
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Prudence pour les cornées ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Prudence pour les cornées ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Prudence pour les cornées ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Prudence pour les cornées ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Prudence pour les cornées ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Prudence pour les cornées < 11 mm. Bien lubrifier, utiliser vitesse 1 (vitesse lente)
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Prudence pour les cornées < 11 mm. Bien lubrifier, utiliser vitesse 1 (vitesse lente)
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Prudence pour les cornées < 11 mm. Bien lubrifier, utiliser vitesse 1 (vitesse lente)
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Prudence pour les cornées < 11 mm. Bien lubrifier, utiliser vitesse 1 (vitesse lente)


La version la plus récente du nomogramme est disponible sur le site internet de MORIA :
<http://www.moria-surgical.com>

Notes:
Centrer l’anneau de succion sur le limbe.
Déterminer la K moyenne, puis sélectionner l’anneau et la butée en fonction.
Pour les cornées supérieures à 11,5 mm de diamètre, le diamètre du flap est réduit de 0,25 mm.
Pour les cornées inférieures à 11,0 mm de diamètre, le diamètre du flap est augmenté de 0,25 mm.
Le choix des anneaux et butées est donné à titre indicatif.

Utilisation du Nomogramme

Moria recommande de ne pas utiliser le One Use-Plus pour des yeux dont l’épaisseur de cornée est inférieure à 500 microns.
Moria recommande de centrer l’anneau de succion sur le limbe.

La version la plus récente du nomogramme est disponible sur le site internet de MORIA :
<http://www.moria-surgical.com>

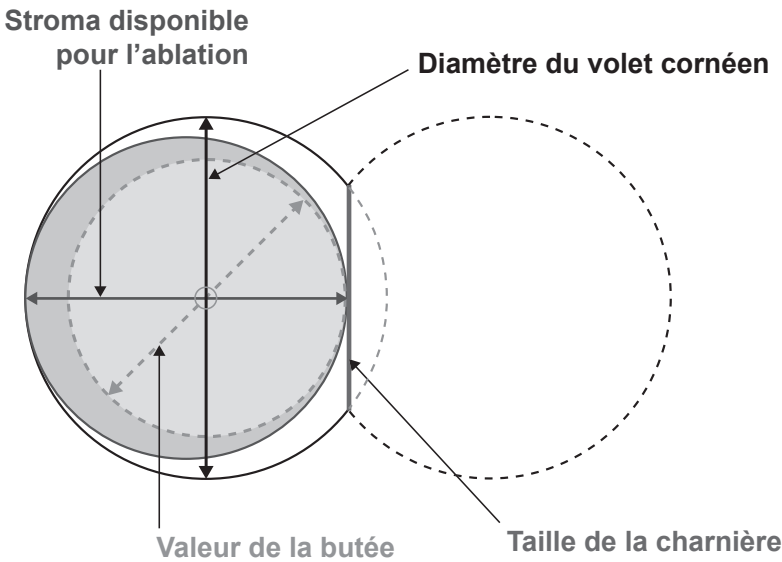

Les résultats peuvent dévier de ceux indiqués dans le nomogramme en fonction de facteurs liés au patient (PIO, degré de myopie, âge, sexe, race, keratométrie, etc.) et à la chirurgie (hydratation de la cornée, temps de succion, etc.). Ce nomogramme a uniquement valeur de recommandation. Moria ne pourra être tenu responsable de quelque dommage direct, fortuit, consécutif ou exemplaire, subi par une tierce partie, même si celle-ci n’a pas été informée de la possibilité qu’un tel dommage se produise.

ES - NOMOGRAMA PARA One Use-Plus
CON ANILLO DE PLÁSTICO DE USO ÚNICO



Media K	Anillo	Cabezal	Detener	Diámetro de la pestaña (supuestos)	Estroma disponible para ablación (cálculos)	Tamaño de la bisagra (cálculos)	Precauciones
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Precaución con relación a las córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Precaución bisagra pequeña. Córneas > 12mm pueden reducir el flap en 0,25 mm
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Precaución con relación a las córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Precaución con relación a las córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Precaución con relación a las córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Precaución con relación a las córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Precaución con relación a las córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Precaución con relación a las córneas < 11 mm. Lubrique bien y realice un paso lento (Velocidad 1).
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Precaución con relación a las córneas < 11 mm. Lubrique bien y realice un paso lento (Velocidad 1).
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Precaución con relación a las córneas < 11 mm. Lubrique bien y realice un paso lento (Velocidad 1).
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Precaución con relación a las córneas < 11 mm. Lubrique bien y realice un paso lento (Velocidad 1).


La version más reciente del nomograma la puede conseguir en la página web de MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

Notas:
Centre el anillo de succión en el limbo al utilizar estas combinaciones de terminación y anillo.
Determinar el promedio K y, a continuación, seleccione la posición de tope y anillo adecuadas.
Para córneas mayores de 11,5 mm de diámetro, el tamaño del flap se reducirá en 0,25 mm.
Las córneas de menos de 11,0 mm de diámetro, el tamaño del flap aumentará en 0,25 mm.
Sólo combinaciones sugeridas- la selección individual de los pacientes puede variar.

Uso del Nomograma

Moria no recomienda el uso de One Use-Plus para ojos con un grosor córneo de menos de 500 micrones.
Moria recomienda centrar el anillo de vacío sobre el limbol.

La version más reciente del nomograma la puede conseguir en la página web de MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

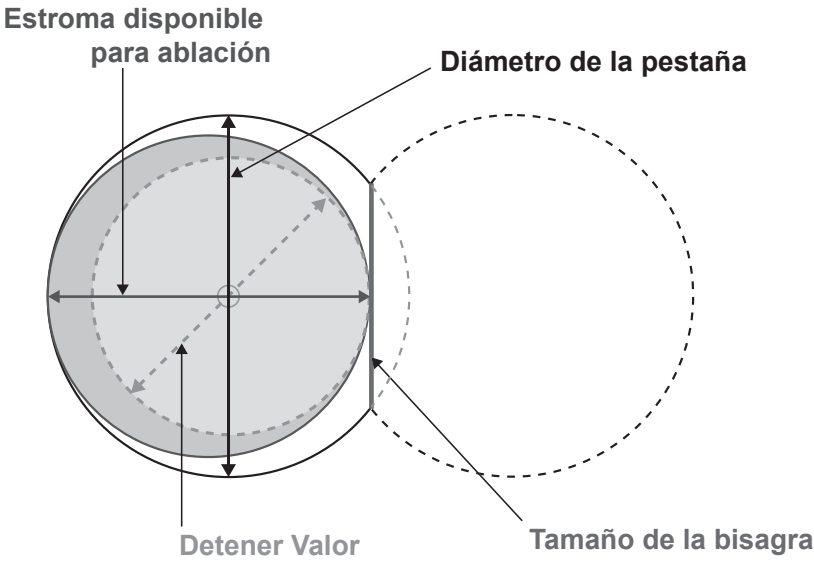

El rendimiento puede desviarse del nomograma en función de varios factores relacionados con el paciente (PIO, grado de miopía, edad, sexo, origen étnico, queratometría, etc.) y factores relacionados con la cirugía (hidratación córnea, tiempo de succión, etc.). El nomograma es una guía general solamente. Se recomienda encarecidamente que cada cirujano establecer su propio nomograma. Moria no se hará responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente o ejemplar sufrido por cualquier pieza, incluso si no se ha advertido de la posibilidad de tales daños.

IT - NOMOGRAMMA PER One Use-Plus
CON ANELLO DI SUZIONE IN PLASTICA MONOUSO



K medio	Anello	Testina	Finecorsa	Diametro lembo corneale (Ipotesi)	Stroma disponibile per ablazione (Calcoli)	Dimensioni cerniera (calcoli)	Precauzioni
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Attenzione per le cornee ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Attenzione cerniera piccola. Per le cornee > 12 mm il lembo puo' diminuire di 0,25 mm
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Attenzione per le cornee ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Attenzione per le cornee ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Attenzione per le cornee ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Attenzione per le cornee ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Attenzione per le cornee ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Attenzione per le cornee < 11 mm. Lubrificare accuratamente e rallentare il passaggio (Velocita 1)
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Attenzione per le cornee < 11 mm. Lubrificare accuratamente e rallentare il passaggio (Velocita 1)
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Attenzione per le cornee < 11 mm. Lubrificare accuratamente e rallentare il passaggio (Velocita 1)
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Attenzione per le cornee < 11 mm. Lubrificare accuratamente e rallentare il passaggio (Velocita 1)


La versione più recente del nomogramma é disponibile sul sito MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

Note:
Centrare l'anello d'aspirazione sul limbus corneale con questo abbinamento di finecorsa e di anello
Determinare il K medio e selezionare l'anello e la posizione del finecorsa in funzione dello stesso.
Per cornee di dimensioni superiori a 11,5 mm di diametro, le dimensioni del lembo corneale diminuiranno di 0,25 mm.
Per cornee di dimensioni inferiori a 11,0 mm di diametro, le dimensioni del lembo corneale aumenteranno di 0,25 mm.
Gli abbinamenti sopra indicati hanno un valore puramente indicativo- la scelta potrà variare in funzione delle caratteristiche del paziente.

Uso del Nomogramma

Moria sconsiglia l'uso dell' One Use-Plus per occhi con spessore corneale inferiore a 500 micron.
Moria raccomanda di centrare l'anello di suzione sul limbus.

La versione più recente del nomogramma é disponibile sul sito MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

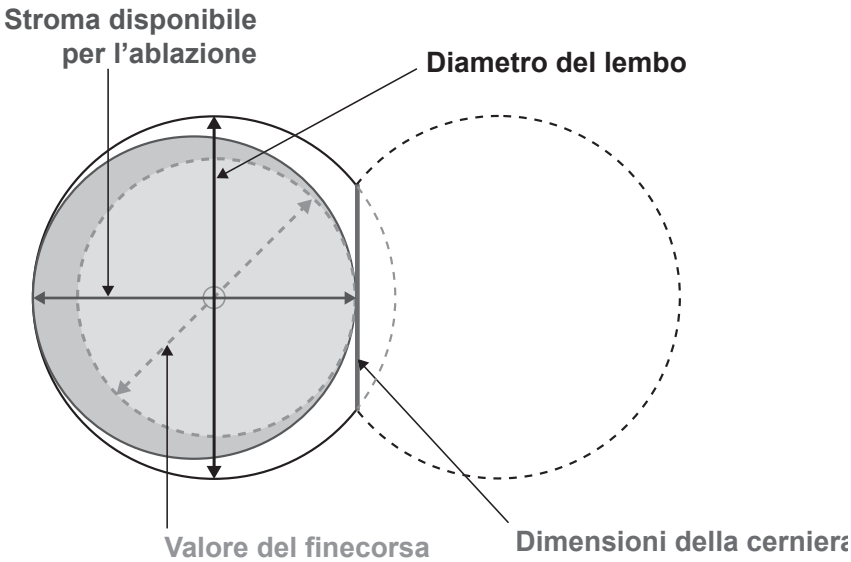

Le prestazioni possono divergere dal nomogramma in funzioni di vari fattori legati al paziente (pressione intraoculare, livello di miopia, età, sesso, origine etnica, cheratometria, ecc.) e di fattori di natura chirurgica (idratazione della cornea, durata dell'aspirazione, ecc.). Il nomogramma è semplicemente destinato a fornire indicazioni generali. Consigliamo, pertanto, vivamente ai singoli chirurghi di creare il loro proprio nomogramma. Moria declina qualunque responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, accessori o punitivi subiti dalle parti, anche se la parte lesa non è stata precedentemente avvertita del possibile verificarsi dell'evento che ha causato il danno.

DE - NOMOGRAMM FÜR One Use-Plus
EINWEG-KUNSTSTOFFRING



Durchschn. K	Ring	Kopf	Stop	Flapdurchmesser (hypothesen)	Stroma verfügbar für ablation (berechn)	Gelenkgröße (berechn)	Warnhinweise
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Vorsicht bei Korneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Vorsicht kleiner Hinge. Korneas >12 mm können den Flap um 0,25 mm verkleinern.
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Vorsicht bei Korneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Vorsicht bei Korneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Vorsicht bei Korneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Vorsicht bei Korneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Vorsicht bei Korneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Vorsicht bei Korneas < 11 mm. Gut befeuchten und mit langsamer Geschwindigkeit behandeln (Speed 1).
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Vorsicht bei Korneas < 11 mm. Gut befeuchten und mit langsamer Geschwindigkeit behandeln (Speed 1).
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Vorsicht bei Korneas < 11 mm. Gut befeuchten und mit langsamer Geschwindigkeit behandeln (Speed 1).
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Vorsicht bei Korneas < 11 mm. Gut befeuchten und mit langsamer Geschwindigkeit behandeln (Speed 1).


Die neueste Version des Nomigrams ist auf der Webseite von MORIA erhältlich:
<http://www.moria-surgical.com>

Anmerkung:
Zentrieren Sie den Saugring auf dem Limbus, wenn Sie diese Stop- und Ringkombinationen verwenden.
Ermitteln Sie Ihren durchschnittlichen K-Wert, und wählen Sie die entsprechende Ring- und Stopposition.
Bei Korneas größer als 11,5 mm Durchmesser, wird die Flapgröße um 0,25 mm abnehmen.
Bei Korneas mit weniger als 11,0 mm Durchmesser, wird sich die Flapgröße um 0,25 mm vergrößern.
Nur vorgeschlagene Werte – individuelle Patientenauswahl kann abweichen.

Verwendung des Nomogramms

Moria empfiehlt keine Verwendung des One Use-Plus bei Augen mit einer Korneadicke von weniger als 500 microns.
Moria empfiehlt den Saugring auf dem Limbus zu zentrieren.

Die neueste Version des Nomigrams ist auf der Webseite von MORIA erhältlich:
<http://www.moria-surgical.com>

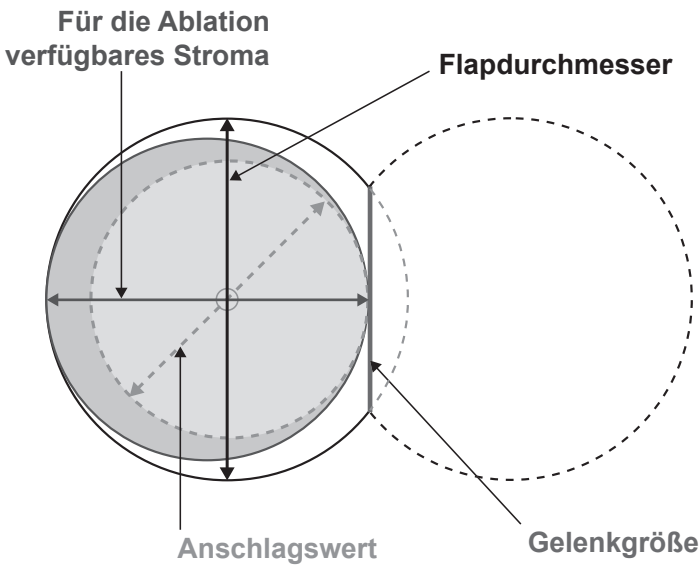

Aufgrund patientenseitiger Faktoren (Augeninnendruck, Grad der Kurzsichtigkeit, Alter, Geschlecht, Ethnie, Keratometrie usw.) und operativer Faktoren (Hornhaut-Hydratation, Absaugzeit usw.) kann die Leistung von dem Nomogramm abweichen. Das Nomogramm soll nur als Anhaltspunkt dienen. Wir empfehlen, dass jeder Chirurg sein eigenes Nomogramm erstellt. Moria haftet nicht für direkte, indirekte, Folge- oder exemplarische Schäden, auch wenn nicht ausdrücklich auf das mögliche Auftreten solcher Schäden hingewiesen wird.

NL - NOMOGRAM VOOR One Use-Plus
MET PLASTIC RING VOOR EENMALIG GEBRUIK



Gemiddelde K	Ring	Kop	Stop	Flapdiameter (veronderstellingen)	Stroma beschikbaar voor ablatie (berekeningen)	Scharnierafmeting (berekeningen)	Opgepast
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Opgepast: cornea's ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Opgepast kleine scharnierafmeting. Cornea's > 12mm kunnen de flap met 0,25 mm verkleinen
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Opgepast: cornea's ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Opgepast: cornea's ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Opgepast: cornea's ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Opgepast: cornea's ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Opgepast: cornea's ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Opgepast: cornea's < 11,0 mm. Goed bevochtigen en trager vooruitgaan (Snelheid 1).
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Opgepast: cornea's < 11,0 mm. Goed bevochtigen en trager vooruitgaan (Snelheid 1).
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Opgepast: cornea's < 11,0 mm. Goed bevochtigen en trager vooruitgaan (Snelheid 1).
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Opgepast: cornea's < 11,0 mm. Goed bevochtigen en trager vooruitgaan (Snelheid 1).


De meest recente versie van de nomogram is beschikbaar op de website van MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

Opmerkingen:
Centreer de zuigring op de limbus wanneer u deze stop- en ringcombinaties gebruikt.
Bepaal de gemiddelde K en kies dan de gepaste ring en stoppositie.
Voor cornea's met een diameter groter dan 11,5 mm zal de flapafmeting met 0,25 mm afnemen.
Voor cornea's met een diameter kleiner dan 11,0 mm zal de flapafmeting met 0,25 mm toenemen.
Dit zijn slechts voorgestelde combinaties – dit kan bij individuele patiënten anders zijn.

Gebruik van het Nomogram

Moria raadt af om de One Use-Plus te gebruiken bij ogen met een corneadikte van minder dan 500 micron.
Moria adviseert om de zuigring te centreren op de limbus.

De meest recente versie van de nomogram is beschikbaar op de website van MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

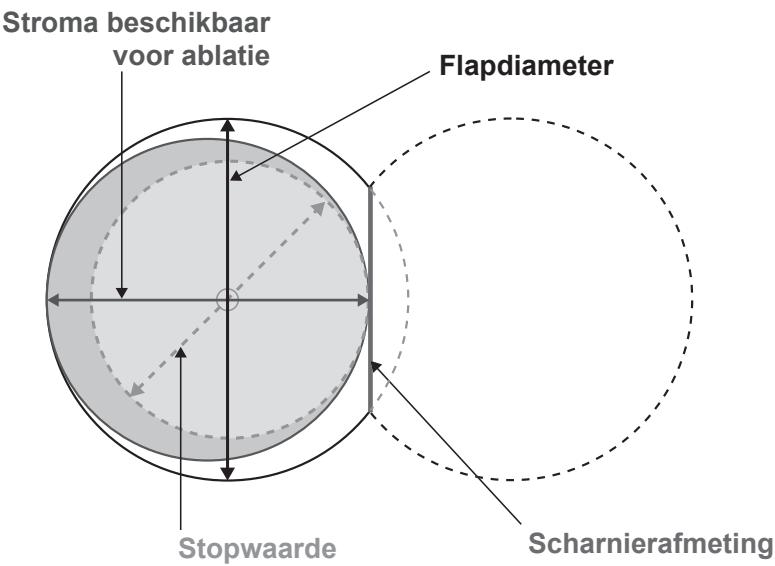

De prestaties kunnen afwijken t.o.v. het nomogram afhankelijk van verschillende patiëntgerelateerde factoren (IOD, graad van bijziendheid, leeftijd, geslacht, ras, keratometrie, enz.) en chirurgiegerelateerde factoren (hydratatie van de cornea, zuigtijd, enz.). Het nomogram is slechts een algemene richtlijn. We bevelen ten stelligste aan dat elke chirurg zijn eigen nomogram opstelt. Moria is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor rechtstreekse, toevallige of hoge schade of gevolgschade geleden door eender welke partij, zelfs indien deze partij niet op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van een dergelijke schade.



Média K	Anel	Cabeça	Batente	Diâmetro da aba (pressupostos)	Estroma Disponível Ablação (cálculos)	Dimensão da articulação (cálculos)	Cuidados
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Cuidado de córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Cuidado pequena articulação. Córneas >12 mm podem reduzir a aba em 0,25 mm
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Cuidado de córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Cuidado de córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Cuidado de córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Cuidado de córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Cuidado de córneas ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Cuidado de córneas < 11 mm. Lubrificar bem e efectuar uma passagem lenta (Speed 1).
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Cuidado de córneas < 11 mm. Lubrificar bem e efectuar uma passagem lenta (Speed 1).
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Cuidado de córneas < 11 mm. Lubrificar bem e efectuar uma passagem lenta (Speed 1).
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Cuidado de córneas < 11 mm. Lubrificar bem e efectuar uma passagem lenta (Speed 1).


A versão mais recente do nomograma está disponível no site MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

Notas:
Centre o anel de aspiração no limbo ao utilizar estas combinações de batente e anel.
Determine a sua média K, em seguida seleccione um anel e posição de paragem adequados.
Para as córneas com diâmetro superior a 11,5 mm, o tamanho da aba diminuirá 0,25 mm.
Para as córneas com diâmetro inferior a 11,0 mm, o tamanho da aba aumentará 0,25 mm.
A selecção das combinações sugeridas tendo em conta o caso individual do paciente poderá variar.

Utilização do Nomograma

A Moria não recomenda a utilização do One Use-Plus para olhos com uma espessura da córnea inferior a 500 micrones.
A Moria recomenda a centragem do anel de sucção no Limbus.

A versão mais recente do nomograma está disponível no site MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

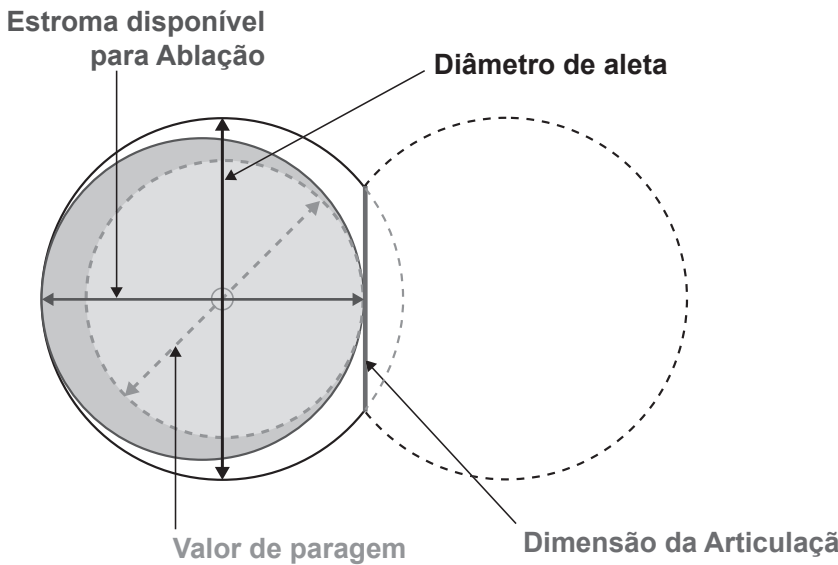

O desempenho pode desviar-se do nomograma dependendo de vários factores relacionados com o paciente (pressão intra-ocular, grau de miopia, idade, sexo, etnia, ceratometria, etc.) e factores associados à cirurgia (hidratação da córnea, tempo de sucção, etc.). O nomograma é apenas um guia geral. Recomenda-se vivamente que cada cirurgião estabeleça o seu próprio nomograma. A Moria não é responsável por qualquer dano directo, incidental, consequential ou exemplar sofrido por qualquer parte, mesmo se essa parte não tiver sido avisada para a possibilidade do dano em causa.

SV - NOMOGRAM FÖR One Use-Plus
PLASTRING FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING



Me- delvärde K	Ring	Huvud	Stop- posi- tion	Luckdiameter (antagande)	Stroma tillgänglig för ablation (beräkning)	Storlek på vikning (beräkning)	Cautions
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Varning: för hornhinnor ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Varning liten vikning. Hornhinnor >12mm kan luckan minskas med 0.25 mm
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Varning: för hornhinnor ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Varning: för hornhinnor ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Varning: för hornhinnor ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Varning: för hornhinnor ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Varning: för hornhinnor ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Varning: för hornhinnor < 11 mm. Fukta väl, och gå saktare fram (Speed 1).
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Varning: för hornhinnor < 11 mm. Fukta väl, och gå saktare fram (Speed 1).
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Varning: för hornhinnor < 11 mm. Fukta väl, och gå saktare fram (Speed 1).
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Varning: för hornhinnor < 11 mm. Fukta väl, och gå saktare fram (Speed 1).


Den senaste versionen av nomogrammet finns på MORIA website:
<http://www.moria-surgical.com>

Obs:
Centrera sugringen på limbus när dessa kombinationer av stopposition och ringar används.
Fastställ medelvärdet på K, välj sedan en passande ring och stopposition.
För hornhinnor större än 11,5 mm i diameter, luckstorleken kan minskas med 0,25 mm.
För hornhinnor mindre än 11,0 mm i diameter, luckstorleken kan ökas med 0,25 mm.
Endast förslag på kombinationer – kan variera beroende på individen.

Användning av Nomogrammet


Moria rekommenderar inte användning av One Use-Plus för ögon där hornhinnans tjocklek är mindre än 500 mikrometer.
Moria rekommenderar att sugringen centreras över limbus.

Den senaste versionen av nomogrammet finns på MORIA website:
<http://www.moria-surgical.com>

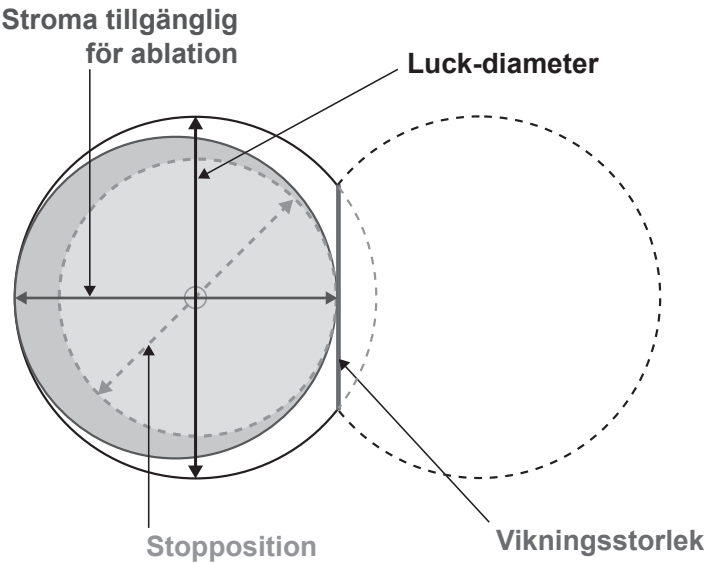

Prestandan kan avvika från nomogrammet beroende på ett flertal faktorer relaterade till patienten (intraokulärt tryck, graden av närsynthet, ålder, kön, härkomst, keratometri, etc.) samt relaterade till det kirurgiska ingreppet (hornhinnans fukthalt, sugtiden, etc.). Nomogrammet är endast en generell vägledning. Det rekommenderas starkt att varje kirurg etablerar sitt eget nomogram. Moria kan inte hållas ansvarig för direkt, episodisk, resulterande eller varnande skada hos någondera part, även om denna part inte meddelats om möjligheten till sådan skada.

TR - PLASTİK HALKA One Use-Plus İÇİN NOMOGRAM

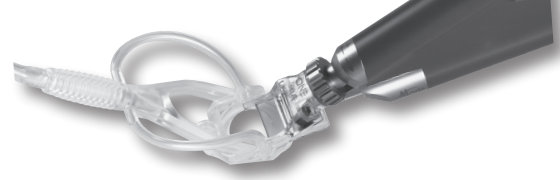

Ortalama K Değeri	Vakum Halkası	Kafa	Durdu- rucu	Flep Çapı (ön Görülen)	Stromada Ablasyon için Oluşturulan Alan (hesaplamalar)	Menteşe boyutu (hesaplama- lar)	Uyarılar
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,3 - 9,4 9,3 - 9,4	8,7 8,5 - 8,6	4,7 - 4,9 5,1 - 5,3	Uyarı: kornea çapı ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	8,8	8,0	4,6	Uyarı-küçük menteşe. Kornea çapı >12 mm, flep çapı 0.25 mm kadar düşürebilir.
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,5 - 9,6 9,5 - 9,6	8,8 8,5 - 8,7	5,1 - 5,3 5,5 - 5,7	Uyarı: kornea çapı ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,50	9,0	8,3	5,0	
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8 7,75	9,8 - 9,9 9,8 - 9,9	8,9 - 9,0 8,8	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Uyarı: kornea çapı ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
	0	90 130	7,5	8,8	8,1	4,6	
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,25 8	10,0 - 10,1 10,0 - 10,1	9,1 - 9,2 9,0 - 9,1	5,7 - 5,8 6,0 - 6,2	Uyarı: kornea çapı ≤ 11 mm
	-1	90 130	7,75	9,5	8,6	5,5	
	0	90 130	7,5	9	8,3	5,0	
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 8,25	10,3 - 10,4 10,3 - 10,4	9,4 - 9,5 9,3	5,8 - 6,0 6,2 - 6,3	Uyarı: kornea çapı ≤ 11 mm
	-1	90 130	8	9,8	8,9	5,7	
	0	90 130	7,5	9,3	8,4	5,5	
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,75 8,5	10,5 - 10,6 10,5 - 10,6	9,6 - 9,7 9,5 - 9,6	4,5 - 6,0 4,5 - 6,2	Uyarı: kornea çapı ≤ 11 mm
	-1	90 130	8,25	10	9,1	4,4	Uyarı: kornea çapı < 11 mm. İyice nemlendirin ve daha yavaş bir geçiş yapın (Hız 1).
	0	90 130	7,75	9,5	9,0	5,5	
45	-1	90 130	8,5	10,3	9,4	5,8	Uyarı: kornea çapı < 11 mm. İyice nemlendirin ve daha yavaş bir geçiş yapın (Hız 1).
	0	90 130	8	9,8	9,2	4,7	
46	0	90 130	8	10	9	6,0	
47	0	90 130	8,25	10,3	9,3	6,2	Uyarı: kornea çapı < 11 mm. İyice nemlendirin ve daha yavaş bir geçiş yapın (Hız 1).
48	0	90 130	8,5	10,5	9,5	6,2	Uyarı: kornea çapı < 11 mm. İyice nemlendirin ve daha yavaş bir geçiş yapın (Hız 1).

Nomogramın en yeni versiyonunu MORIA'nın web sitesinde bulabilirsiniz:
<http://www.moria-surgical.com>

Notlar:

Bu durdurucu ve vakum halkası kombinasyonları kullanıldığında vakum halkasını limbus üzerinde ortalayın.

Ortalama K değerini hesaplayın ve sonra uygun halka ve durdurucu pozisyonunu seçin.

Kornea çapı 11,5 mm'den büyük ise flep çapı 0,25 mm düşecektir.


Kornea çapı 11,0 mm'den küçük ise flep çapı 0,25 mm artacaktır.

Sadece önerilen kombinasyonlar – bireysel hasta seçimi değişebilir.

Nomogramın Kullanılması

Moria, 500 mikronun altında korneal kalınlığa sahip gözler için One Use-Plus kullanımını önermemektedir. Moria vakum halkasını limbusa göre merkezlenmesini önermektedir.

Nomogramın en yeni versiyonunu MORIA'nın web sitesinde bulabilirsiniz:
<http://www.moria-surgical.com>

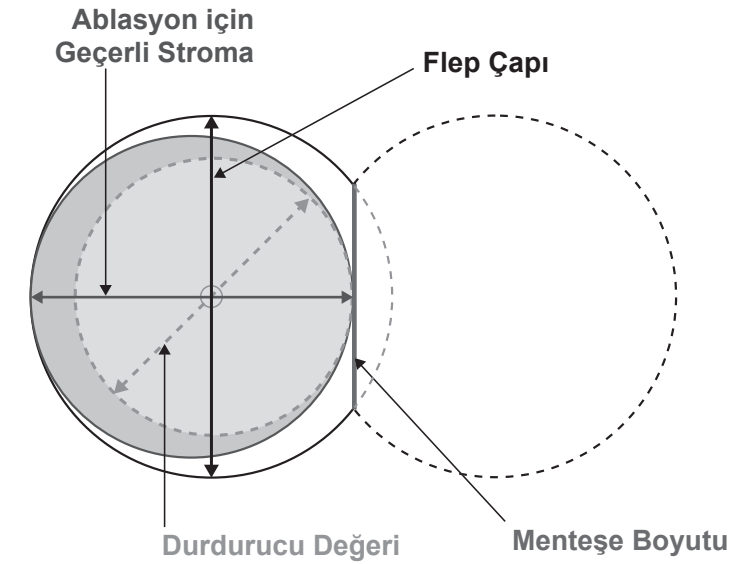

Hastadan kaynaklanan faktörlere (IOP, miyopi derecesi, yaş, cinsiyet, etnik köken, keratometri, vs.) ve cerrahi yöntemden kaynaklanan faktörlere (korneal hidrasyon, emme süresi, vs.) bağlı olarak nomograma göre performans farklılık gösterebilir. Nomogram sadece genel bir kılavuzdur. Her cerrahın kendi nomogramını oluşturması şiddetle önerilir. Moria; herhangi bir tarafça katlanılacak doğrudan, dolaylı, cezai ve başka türlü hasarlardan, söz konusu taraf böyle bir hasar olasılığına dair bilgilendirilmemiş olsa bile, sorumlu olmayacaktır.



MORIA S.A. – 15, rue GEORGES BESSE - 92160 ANTONY – France
#65041-F-02.2022

