

Instruments  
à usage unique



Punch Gardé **one**<sup>®</sup>

**Punch gardé à usage unique**


pour la préparation de greffon DMEK

# Punch Gardé **one**® à Usage Unique



## Excellente visibilité :

- ✓ Conception à 3 fenêtres
- ✓ Lame gardée : facilite la séparation puis le prélèvement du tissu trépané

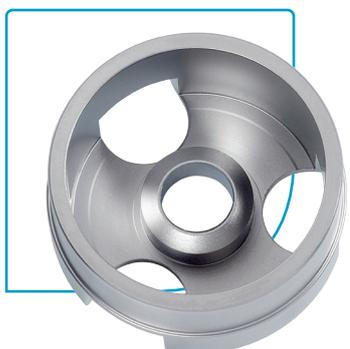

## Découpe précise :

- ✓ Lame à double biseau : verticalité optimale de la découpe
- ✓ Tranchant aiguisé : pour une découpe nette
- ✓ Garde précalibrée : pour inciser la membrane de Descemet d'une simple pression sans être transfixiant



## Centrage parfait :

- ✓ 4 repères cardinaux : pour centrer le tissu sur la base du punch
- ✓ 21 trous de succion : pour maintenir le tissu fermement et uniformément
- ✓ Préparation du greffon simplifiée avec ou sans aspiration

## Large choix de diamètres :

- ✓ Diamètres 9.5 et 10.0 mm : pour la délaminatation périphérique
- ✓ Diamètres 7.5, 7.75, 8.0 et 8.5 mm : pour la trépanation du greffon

Références: #17207Dxxx avec xxx = 7.5/7.75/8.0/8.5/9.5/10.0

- Ce document regroupe des dispositifs de classe Is marqués CE0459 (LNE/G-MED)
- Lire attentivement les notices d'utilisation correspondantes
- Les dispositifs médicaux mentionnés ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie

Pour plus d'informations :



MORIA SA  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
Tél. : +33 (0) 1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria**  
Leading Innovations in Ophthalmology®

