One Use-*Plus*


ZH 繁體中文 OUP 一次性使用刀頭裝配資訊表

OUP 環標示




OUP 系統


- OUP 刀頭（藍色盒貼紙）
- OUP 吸環（OUP 標示和藍色或黃色止動）

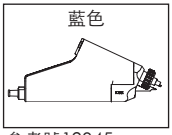

參考號19345

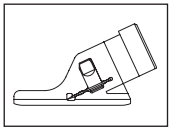

參考號19393/XX

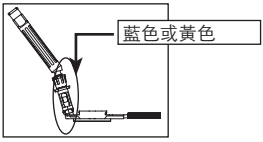

參考號藍色
19391/-1
19391/0

參考號黃色
19391/1
19391/2
19391/3

警告

切勿將 EPI-K™系統配套 OUP 組件使用

目次

帶刀片的 One Use-Plus 一次性使用刀頭。**圖 1**

指導

Ⓐ 將機頭裝配在刀頭上

1 / 從外皮袋取出塑膠內包裝。
2 / 將包裝在刀片螺釘向下放置 **圖 2A** 並且打開包裝的上部 圖 **2B**
3 / 順時針擰緊鎖緊螺釘，以固定刀頭於機頭上。核實刀頭是否與機頭牢固擰緊。不應存在刀頭轉動 **圖 3/圖 4/圖 5**。
4 / 一旦裝配好，顯微鏡下視檢刀片。
5 / 使用前，用 BSS®（Alcon 的商標）或另一種適宜溶液潤滑刀片。
6 / 啟動機頭以檢查刀片是否恰當接合並振動

Ⓑ 將機頭裝配在吸環上

1 / 在吸環的導軌中插入刀頭時，機頭應當距吸環的金屬螺紋軸呈 45° 角，以防止軸觸碰刀頭和分離器組合體 **圖 6**。一旦刀頭完全插入吸環的導軌中，柔和減少 45° 角至 0° 並將刀頭略微推入吸環 **圖 7**。

2 / ⚠ **警告!切勿用螺紋軸觸碰刀片（如以下圖片中所示），這將會損壞刀片的邊緣 圖 8。**

Ⓒ 拆卸 OUP 一次性使用刀頭

欲拆卸 OUP 一次性使用刀頭，將它插入包裝並反時針擰松鎖緊螺釘。將一切東西丟棄在生物危害容器中 **圖 9/圖 10/圖 11**。

Fig.1



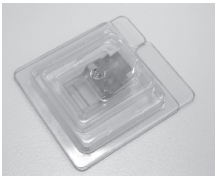


Fig.2

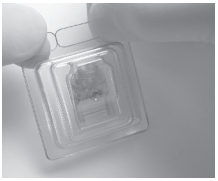

2A

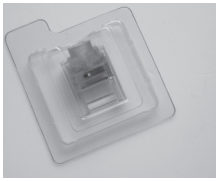

2B

Fig.3

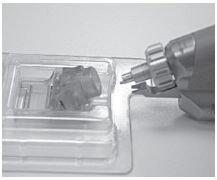


Fig.4



Fig.5

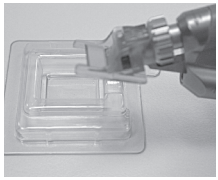


Fig.6

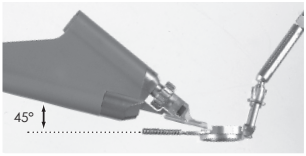


Fig.7



Fig.8

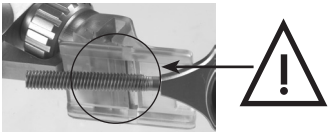


Fig.9

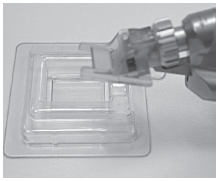


Fig.10


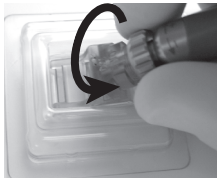


Fig.11

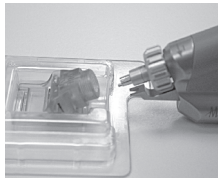

MORIA #65055ZH-TW-B-05.2023

To obtain more information

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
www.moria-surgical.com
CE 0459

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: + 1 (215) 230 7670
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku Tokyo
101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
www.moriajapan.com

Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432 West Huai Hai Road, Changning district ,Shanghai,200052 , P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号凯利大厦6楼08室
Tel/Fax: +86 021 52586095
www.moria-surgical.com

Moria
Ophthalmic Instruments