


EN - Nomogram for One Use-Plus with metal ring	2
FR - Nomogramme pour One Use-Plus avec anneau métal	4
ES - Nomograma para One Use-Plus con anillo de metal	6
IT - Nomogramma per One Use-Plus con anello di suzione metallico	8
DE - Nomogramm für One Use-Plus mit Metallring	10

NL - Nomogram voor One Use-Plus met metalen ring	12
PT - Nomograma para One Use-Plus com anel metálico	14
SV - Nomogram för One Use-Plus med metallring.....	16
TR - Metal halkalı One Use-Plus için Nomogram	18



Ref.: 65067

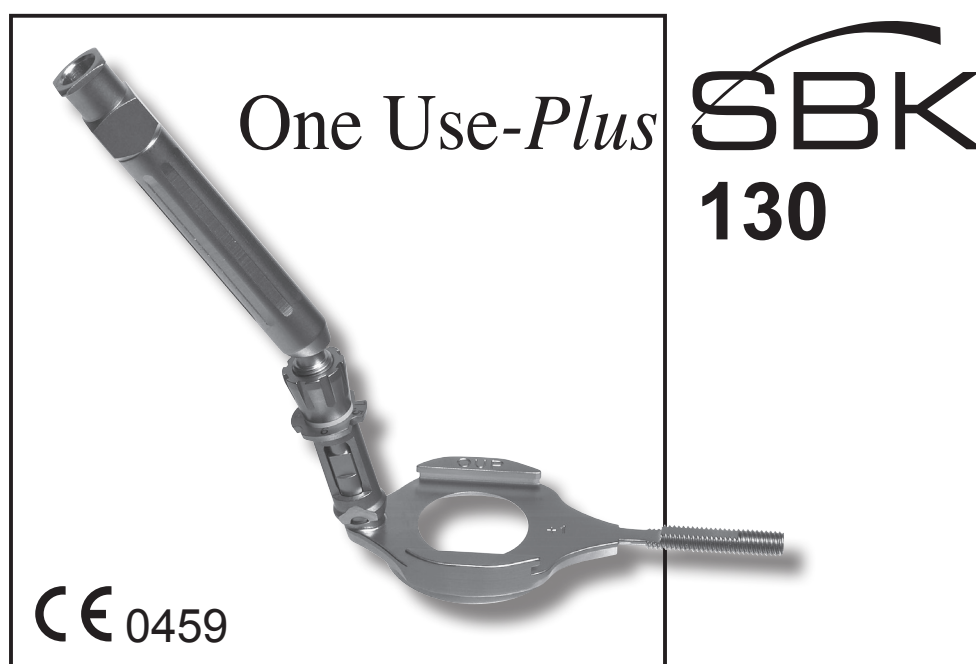

Moria

MORIA S.A. – 15, rue GEORGES BESSE - 92160 ANTONY – France
#65067-H-03.2022

EN - NOMOGRAM FOR One Use-Plus
WITH METAL RING




Horizontal K	Ring size	Calibrated Head	Stop value	Flap Diameter (assumptions)	Stroma available for ablation (calculations)	Hinge size (calculations)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.0	9.3	8.6	2.4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.0	9.4	8.7	2.5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.0 8.5	9.7 9.8	9.0 9.2	2.7 2.4
	-1 0	90/130	8 7.5	9.5 9.0	8.8 8.3	5.1 5.0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.0 8.5 9.0	10.0 10.1 10.2	9.5 9.5 9.7	3.0 2.7 2.4
	-1 0	90/130	8 7.5	9.8 9.3	8.9 8.4	5.6 5.4
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.5 9.0	10.2 10.4	9.6 9.8	2.8 2.6
	-1 0 1	90/130	8.5 8 7.5	10.0 9.5 9.0	9.3 8.8 8.3	5.3 5.1 5.0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8.5 9.0	10.3 10.4	9.7 9.8	2.9 2.6
	-1 0 1	90 / 130	8.5 8 7.5	10.3 9.8 9.3	9.4 8.9 8.4	5.7 5.6 5.4
43	0 1 2	90 / 130	8.5 8 7.5	10.0 9.5 9.0	9.3 8.8 8.3	5.3 5.1 5.0
44	0 1 2	90 / 130	8.5 8 7.5	10.3 9.8 9.3	9.4 8.9 8.4	5.7 5.6 5.4
45	1 2 3	90/130	8.5 7.5 7.5	10.0 9.5 9.0	9.3 8.5 8.3	5.3 5.8 5.0
46	2 3	90/130	8 7.5	9.8 9.3	8.9 8.4	5.6 5.4
47	2 3	90/130	8.5 8	10.0 9.5	9.3 8.8	5.3 5.1
48	2 3	90/130	8.5 8	10.3 9.8	9.4 8.9	5.7 5.6
49	3	90/130	8.5	10.0	9.3	5.3

Center the ring on the limbus.
Determine the horizontal K, round the value to the nearest whole number and select appropriate ring and stop (for 42.5 ≤ K < 43.5 round to 43).
For corneas greater than 12 mm in diameter, choose the lowest one of the rings proposed for the keratometry (for an horizontal K of 43, choose 0).
For corneas less than 11 mm in diameter, choose the highest one of the rings proposed for the keratometry (for an horizontal K of 43, choose +2).

Using the Nomogram

- Corneas with diameters between 11.0 and 12.0 mm.**
Select the ring size and stop value as a function of the horizontal keratometry.
Round the horizontal K value to the nearest whole number following the example:
If 42.5 ≤ Horizontal K < 43.5, round to 43
- Corneas with diameters <11.0 or >12.0 mm require adjustment of the nomogram value.**
The corneal diameter has an impact on the flap diameter. More corneal tissue will protrude through the suction ring with a small eye than with a large eye. For the same ring and keratometry, the flap obtained on a small eye will be larger than that obtained on a large eye.
 - Small Corneas <11.0 mm:** Select the highest one of the rings proposed for the keratometry, as per the following example: for an horizontal K of 43, choose +2.
 - Large Corneas >12.0 mm:** Select the lowest one of the rings proposed for the keratometry, as per the following example: for an horizontal K of 43, choose 0.

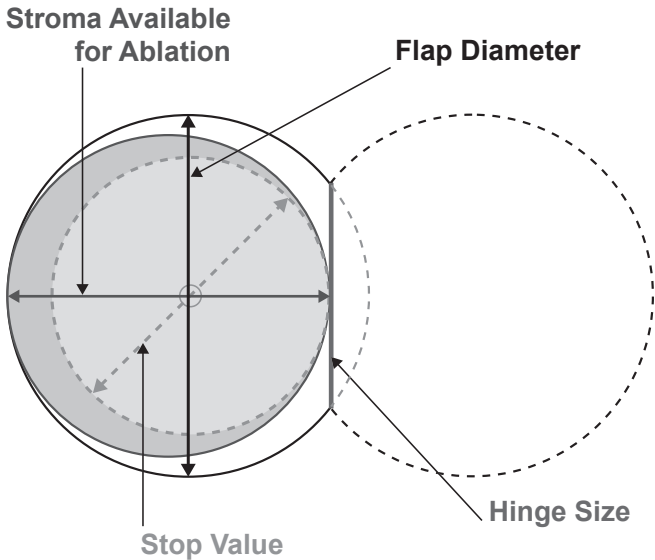

Moria does not recommend using the One Use-Plus for eyes with corneal thicknesses less than 500 microns.
Moria recommends to center the suction ring on the limbus.
Moria recommends to use Speed 2.

Refer to associated user manual #65040 for complete information.
The most recent version of the nomogram is available on the MORIA website:
<http://www.moria-surgical.com>

Performance may deviate from the nomogram depending on several patient-related factors (IOP, degree of myopia, age, gender, ethnicity, keratometry, etc.) and surgery-related factors (corneal hydration, suction time, etc.). The nomogram is a general guide only. It is strongly recommended that every surgeon establish his own nomogram. Moria shall not be responsible for any direct, incidental, consequential or exemplary damage suffered by any party, even if that party has not been advised of the possibility of such damage.




K Horizontale	Anneau de succion	Tête de découpe	Butée	Diamètre du volet cornéen (estimation)	Stroma disponible pour ablation (calcul)	Taille de la charnière (calcul)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5	9,7 9,8	9,0 9,2	2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,5 9,0	8,8 8,3	5,1 5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5 9,0	10,0 10,1 10,2	9,5 9,5 9,7	3,0 2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,2 10,4	9,6 9,8	2,8 2,6
	-1 0 1	90/130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,3 10,4	9,7 9,8	2,9 2,6
	-1 0 1	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
43	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
45	1 2 3	90/130	8,5 7,5 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,5 8,3	5,3 5,8 5,0
46	2 3	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
47	2 3	90/130	8,5 8	10,0 9,5	9,3 8,8	5,3 5,1
48	2 3	90/130	8,5 8	10,3 9,8	9,4 8,9	5,7 5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3

Déterminer la K horizontale, arrondir au nombre entier le plus proche, puis sélectionner l’anneau et la butée (pour $42.5 \leq K < 43,5$ arrondir à 43).
Centrer l’anneau de succion sur le limbe.
Pour les cornées supérieures à 12mm de diamètre, choisir l’anneau dont la taille est la plus faible à la kératométrie indiquée (pour une K horizontale de 43, choisir l’anneau 0).
Pour les cornées inférieures à 11mm de diamètre, choisir l’anneau dont la taille est la plus grande à la kératométrie indiquée (pour une K horizontale de 43, choisir l’anneau +2).

Utilisation du Nomogramme

1. Pour les cornées de diamètre entre 11.0 et 12.0mm
Sélectionner la taille de l’anneau ainsi que la valeur de la butée en fonction de la kératométrie horizontale. Arrondir la valeur de la K horizontale au nombre entier le plus proche, comme dans l’exemple suivant :
Si $42,5 \leq K \text{ Horizontale} < 43,5$, arrondir à 43
2. Les cornées de diamètre <11,0 ou >12,0mm demandent une adaptation du nomogramme.
Le diamètre cornéen a un impact sur le diamètre du volet. Sur un œil petit, la cornée dépasse plus de l’anneau de succion que sur un œil grand. Le volet obtenu sur un œil petit sera donc plus grand que sur un œil grand avec le même anneau et à kératométrie égale.
- Petites cornées <11,0 mm : Sélectionner la valeur d’anneau la plus élevée indiquée sur le nomogramme pour la kératométrie donnée, comme dans l’exemple suivant : pour une K horizontale de 43, choisir l’anneau +2.
 - Grandes cornées > 12,0 mm : Sélectionner la valeur d’anneau la plus faible indiquée sur le nomogramme pour la kératométrie donnée, comme dans l’exemple suivant : pour une K horizontale de 43, choisir l’anneau 0.

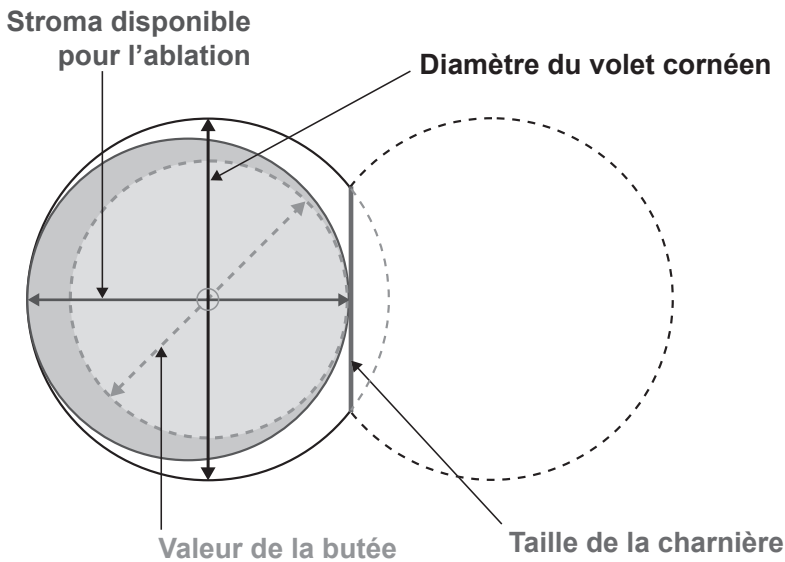

Moria recommande de ne pas utiliser le One Use-Plus pour des yeux dont l’épaisseur de cornée est inférieure à 500 microns.
Moria recommande de centrer l’anneau de succion sur le limbe.
Moria recommande de sélectionner la vitesse 2.

La version la plus récente du nomogramme est disponible sur le site internet de MORIA :
<http://www.moria-surgical.com>

Les résultats peuvent dévier de ceux indiqués dans le nomogramme en fonction de facteurs liés au patient (PIO, degré de myopie, âge, sexe, race, keratométrie, etc...) et à la chirurgie (hydratation de la cornée, temps de succion, etc...). Ce nomogramme a uniquement valeur de recommandation. Moria ne pourra être tenu responsable de quelque dommage direct, fortuit, consécutif ou exemplaire, subi par une tierce partie, même si celle-ci n’a pas été informée de la possibilité qu’un tel dommage se produise.

ES - NOMOGRAMA PARA One Use-Plus
CON ANILLO DE METAL




Horizontal K	Anillo	Cabezal	Terminación	Diámetro de la pestaña (supuestos)	Estroma disponible para ablación (cálculos)	Tamaño de la bisagra (cálculos)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5	9,7 9,8	9,0 9,2	2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,5 9,0	8,8 8,3	5,1 5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5 9,0	10,0 10,1 10,2	9,5 9,5 9,7	3,0 2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,2 10,4	9,6 9,8	2,8 2,6
	-1 0 1	90/130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,3 10,4	9,7 9,8	2,9 2,6
	-1 0 1	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
43	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
45	1 2 3	90/130	8,5 7,5 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,5 8,3	5,3 5,8 5,0
46	2 3	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
47	2 3	90/130	8,5 8	10,0 9,5	9,3 8,8	5,3 5,1
48	2 3	90/130	8,5 8	10,3 9,8	9,4 8,9	5,7 5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3

Determine la K horizontal, redondee el valor más cercano al valor a aplicar y seleccione el anillo y el tope apropiados (para $42.5 \leq K < 43,5$ redondee a 43).
Centre el anillo sobre el limbo.
Para corneas mayores de 12 mm de diámetro, elija uno de los anillos más bajos propuestos por la queratometría (para una K horizontal de 43, elija 0).
Para corneas menores de 11 mm de diámetro, elija el mayor de los anillos propuestos por la queratometría (para una K horizontal de 43, elija +2).

Uso del Nomograma

- En corneas de diámetro entre 11.0 y 12.0mm**
Seleccione el tamaño del anillo y el valor del tope en función de la queratometría horizontal Redondee al valor más cercano a la K como pued el siguiente e observar en ejemplo
Si $42,5 \leq K \text{ Horizontal} < 43,5$, redondee a 43
- Las córneas con diámetros <11,0 o > 12,0 mm exigen un ajuste del valor del nomograma.**
El diámetro de la córnea tiene un impacto en el diámetro de la solapa. Sobresaldrá más fácilmente más tejido córneo a través del anillo de succión con un ojo pequeño que con un ojo grande. Por el mismo anillo y queratometría, la solapa obtenida en un ojo pequeño será mayor que la obtenida en un ojo grande.
 - Córneas pequeñas <11,0 mm:** Seleccione el anillo más alto propuesto para la queratometría, como por ejemplo: para un K horizontal de 43, seleccione +2.
 - Córneas grandes > 12,0 mm:** Seleccione el anillo más bajo propuesto para la queratometría, como por ejemplo: para un K horizontal de 43, seleccione 0.

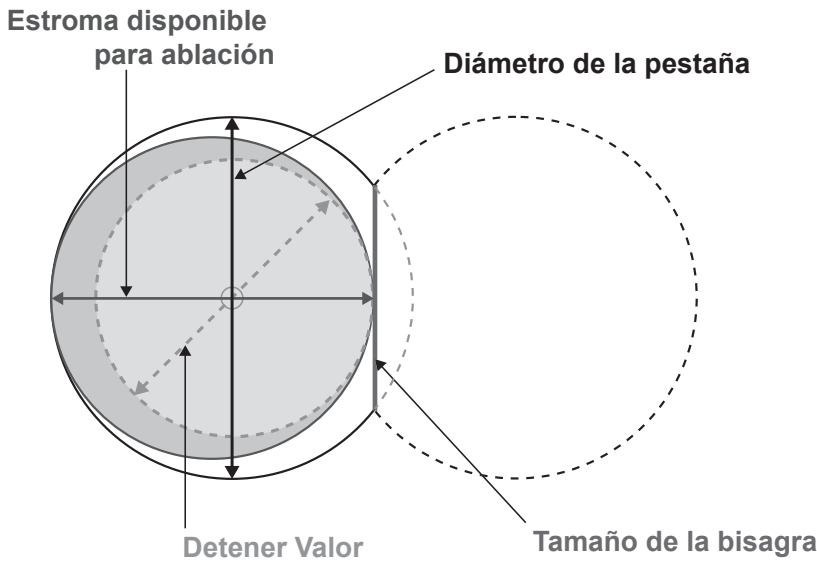

Moria no recomienda el uso de One Use-Plus para ojos con un grosor córneo de menos de 500 micrones.
Moria recomienda centrar el anillo de vacío sobre el limbo.
Moria recomienda utilizar velocidad 2.

La version más reciente del nomograma la puede conseguir en la página web de MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

El rendimiento puede desviarse del nomograma en función de varios factores relacionados con el paciente (PIO, grado de miopía, edad, sexo, origen étnico, queratometría, etc.) y factores relacionados con la cirugía (hidratación córnea, tiempo de succión, etc.). El nomograma es una guía general solamente. Se recomienda encarecidamente que cada cirujano establecer su propio nomograma. Moria no se hará responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente o ejemplar sufrido por cualquier pieza, incluso si no se ha advertido de la posibilidad de tales daños.




K Orizzontale	Anello	Testina	Finecorsa	Diametro lembo corneale (ipotesi)	Stroma disponibile per l'ablazione (calcoli)	Dimensioni cerniera (calcoli)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,7	9,0	2,7
			8,5	9,8	9,2	2,4
	-1 0	90/130	8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	10,0	9,5	3,0
			8,5	10,1	9,5	2,7
	-1 0	90/130	8	10,2	9,7	2,4
			7,5	9,8	8,9	5,6
	-1 0	90/130	8	9,3	8,4	5,4
			7,5	10,2	9,6	2,8
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,4	9,8	2,6
			9,0	10,0	9,3	5,3
	-1 0 1	90/130	8,5	9,5	8,8	5,1
			8	9,0	8,3	5,0
	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,7	2,9
			9,0	10,4	9,8	2,6
42	-1 0 1	90 / 130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
	0 1 2	90 / 130	7,5	9,3	8,4	5,4
			8,5	10,0	9,3	5,3
43	0 1 2	90 / 130	8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
	1 2 3	90/130	7,5	9,3	8,4	5,4
			8,5	10,0	9,3	5,3
45	2 3	90/130	7,5	9,5	8,5	5,8
			8	9,0	8,3	5,0
46	2 3	90/130	8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
47	2 3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
48	2 3	90/130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3

Determina il K orizzontale, arrotonda il valore a quello superiore più vicino e seleziona l'anello e lo stop appropriati (per $42.5 \leq K < 43,5$ arrotonda a 43).
Centra l'anello sul limbus.
Per cornee superiori a 12 mm di diametro, scegli il più basso tra gli anelli proposti per la cheratometria (per un K orizzontale di 43, scegli 0).
Per cornee inferiori a 11 mm di diametro, scegli quello più alto tra gli anelli proposti per la cheratometria (per un K orizzontale K di 43, scegli +2).

Uso del Nomogramma

- Cornee con diametri compresi tra 11.0 e 12.0 mm.**
Selezionare la grandezza dell'anello e il valore di stop come una funzione della cheratometria orizzontale. Arrotonda il valore del K orizzontale al valore superiore più vicino, seguendo questo esempio:
per $42.5 \leq K \text{ orizzontale} < 43.5$, arrotondato a 43
- Può darsi che il valore del nomogramma delle cornee con diametri <11.0 o >12.0 mm debba essere modificato.**
Il diametro della cornea ha un impatto sul diametro del lembo corneale. Con una cornea di piccolo diametro la quantità di tessuto corneale che sporge dall'anello d'aspirazione sarà superiore a quella di una cornea di grosso diametro. Con lo stesso anello e la stessa cheratometria, il lembo ottenuto su una cornea di piccole dimensioni sarà più grande di quello ottenuto su una cornea di grandi dimensioni.
 - Cornee di piccole dimensioni <11.0 mm:** selezionare l'anello più grande tra quelli proposti per la cheratometria, come segue: per un K orizzontale di 43, scegliere +2.
 - Cornee di grandi dimensioni >12.0 mm:** selezionare l'anello più piccolo tra quelli proposti per la cheratometria, come segue: per un K orizzontale di 43, scegliere 0.

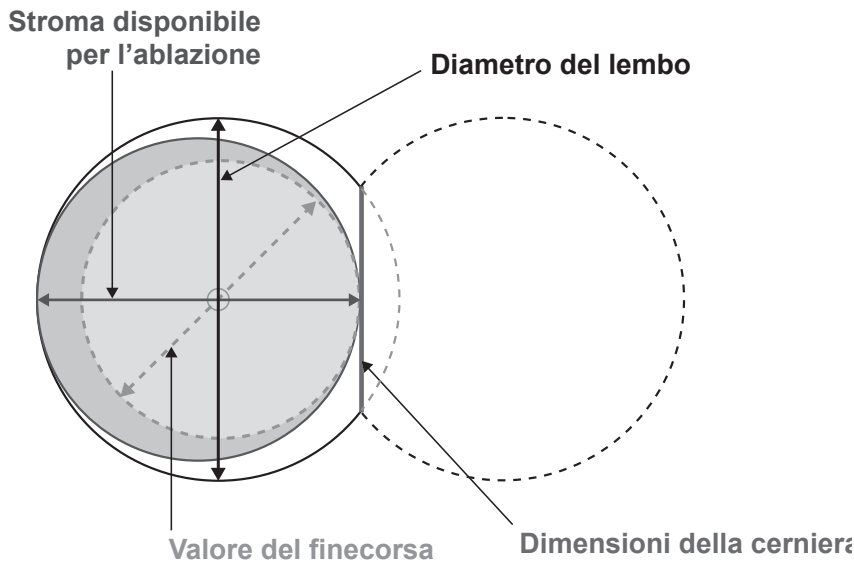

Moria sconsiglia l'uso dell' One Use-Plus per occhi con spessore corneale inferiore a 500 micron.
Moria raccomanda di centrare l'anello di suzione sul limbus.
Moria raccomanda di selezionare la velocità 2.

La versione più recente del nomogramma é disponibile sul sito MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

Le prestazioni possono divergere dal nomogramma in funzioni di vari fattori legati al paziente (pressione intraoculare, livello di miopia, età, sesso, origine etnica, cheratometria, ecc.) e di fattori di natura chirurgica (idratazione della cornea, durata dell'aspirazione, ecc.). Il nomogramma è semplicemente destinato a fornire indicazioni generali. Consigliamo, pertanto, vivamente ai singoli chirurghi di creare il loro proprio nomogramma. Moria declina qualunque responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, accessori o punitivi subiti dalle parti, anche se la parte lesa non è stata precedentemente avvertita del possibile verificarsi dell'evento che ha causato il danno.



Horizontale K	Ring	Kopf	Lidspreizer	Flapdurchmesser (Hypothesen)	Für die Ablation verfügbares Stroma (Berechnungen)	Gelenkgröße (Berechnungen)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5	9,7 9,8	9,0 9,2	2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,5 9,0	8,8 8,3	5,1 5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5 9,0	10,0 10,1 10,2	9,5 9,5 9,7	3,0 2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,2 10,4	9,6 9,8	2,8 2,6
	-1 0 1	90/130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,3 10,4	9,7 9,8	2,9 2,6
	-1 0 1	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
43	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
45	1 2 3	90/130	8,5 7,5 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,5 8,3	5,3 5,8 5,0
46	2 3	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
47	2 3	90/130	8,5 8	10,0 9,5	9,3 8,8	5,3 5,1
48	2 3	90/130	8,5 8	10,3 9,8	9,4 8,9	5,7 5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3


Ermitteln Sie den horizontalen K-Wert, runden Sie den Wert auf die nächstgelegene, volle Nummer und wählen Sie den entsprechenden Ring und Stopp (für $42.5 \leq K < 43,5$ auf 43 runden). Zentrieren Sie den Ring auf dem Limbus.

Für Korneas größer als 12 mm Durchmesser, wählen Sie den niedrigsten der vorgeschlagenen Ringe für die Keratometrie (für einen horizontalen K-Wert von 43, wählen Sie 0).

Für Korneas kleiner als 11 mm Durchmesser, wählen Sie den höchsten der vorgeschlagenen Ringe für die Keratometrie (für einen horizontalen K-Wert von 43, wählen Sie +2).

Verwendung des Nomogramms

1. **Korneas mit Durchmesser zwischen 11.0 und 12.0 mm.**
Wählen Sie Ringgröße und Stoppwert als Funktion der horizontalen Keratometrie. Runden Sie den horizontalen K Wert auf die nächstgelegene, volle Nummer, wie im Beispiel gezeigt:
Wenn $42,5 \leq \text{horizontale K} < 43,5$, auf 43 runden
2. **Für eine Hornhaut mit <11,0 oder >12,0 mm Hornhaut muss der Wert im Nomogramm angepasst werden.**
Der Hornhautdurchmesser wirkt sich auf den Flapdurchmesser aus. Bei einem kleinen Auge wird mit dem Saugring mehr Hornhautgewebe angesaugt als bei einem großen. Bei dem gleichen Ring und der gleichen Keratometrie ist der Flap bei einem kleinen Auge größer als bei einem großen.
 - **Kleine Hornhaut <11,0 mm:** Den größten der für die Keratometrie in Frage kommenden Ringe nehmen. Beispiel: Für eine horizontale K von 43: +2.
 - **Große Hornhaut >12,0 mm:** Den kleinsten der für die Keratometrie in Frage kommenden Ringe nehmen. Beispiel: Für eine horizontale K von 43: 0.

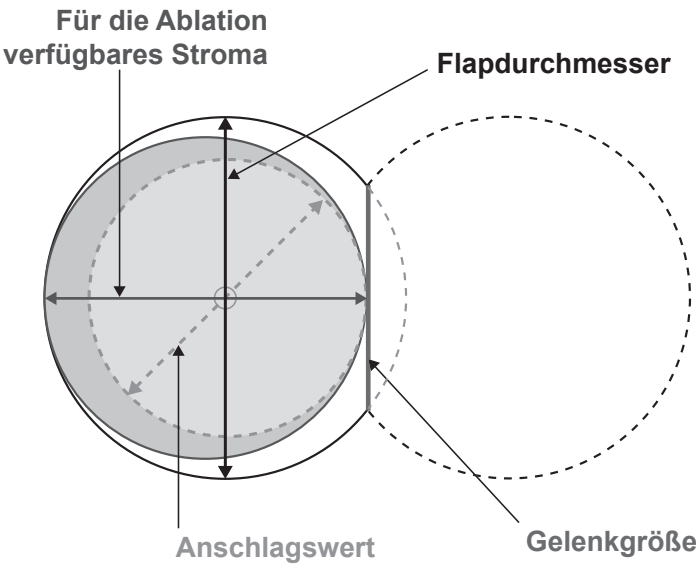

Moria empfiehlt keine Verwendung des One Use-Plus bei Augen mit einer Korneadicke von weniger als 500 microns.

Moria empfiehlt den Saugring auf dem Limbus zu zentrieren.

Moria empfiehlt die Geschwindigkeit 2 auszuwählen.

Die neueste Version des Nomigrams ist auf der Webseite von MORIA erhältlich:
<http://www.moria-surgical.com>

Aufgrund patientenseitiger Faktoren (Augeninnendruck, Grad der Kurzsichtigkeit, Alter, Geschlecht, Ethnie, Keratometrie usw.) und operativer Faktoren (Hornhaut-Hydratation, Absaugzeit usw.) kann die Leistung von dem Nomogramm abweichen. Das Nomogramm soll nur als Anhaltspunkt dienen. Wir empfehlen, dass jeder Chirurg sein eigenes Nomogramm erstellt. Moria haftet nicht für direkte, indirekte, Folge- oder exemplarische Schäden, auch wenn nicht ausdrücklich auf das mögliche Auftreten solcher Schäden hingewiesen wird.




Horizontale K	Ring	Kop	Stop	Flapdiameter (veronderstellingen)	Stroma beschikbaar voor ablatie (berekeningen)	Scharnierafmeting (berekeningen)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,7	9,0	2,7
			8,5	9,8	9,2	2,4
	-1 0	90/130	8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	10,0	9,5	3,0
			8,5	10,1	9,5	2,7
	-1 0	90/130	9,0	10,2	9,7	2,4
			8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,2	9,6	2,8
			9,0	10,4	9,8	2,6
	-1 0 1	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,7	2,9
			9,0	10,4	9,8	2,6
	-1 0 1	90 / 130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
43	0 1 2	90 / 130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
45	1 2 3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			7,5	9,5	8,5	5,8
			7,5	9,0	8,3	5,0
46	2 3	90/130	8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
47	2 3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
48	2 3	90/130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3

Bepaal de horizontale K, afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal en selecteer de geschikte ring en stop. (bij $42,5 \leq \text{Horizontale K} < 43,5$, afronden naar 43).
Centreer de ring op de limbus.
Voor cornea's groter dan 12 mm. diameter, kies de kleinste van de geadviseerde ringen voor keratometrie (voor een horizontale K van 43 kies 0).
Voor cornea's kleiner dan 11 mm. diameter, kies de grootste van de geadviseerde ringen voor keratometrie (voor een horizontale K van 43 kies +2).

Gebruik van het Nomogram

1. Cornea's met diameters tussen 11.0 en 12.0 mm.
Selecteer de ringmaat en stopwaarde als functie van de horizontale keratometrie. Rond de horizontale K waarde af naar het dichtstbijzijnde hele getal, zie voorbeeld:
Bij $42,5 \leq \text{Horizontale K} < 43,5$, afronden naar 43
2. Cornea's met diameters <11,0 of >12,0 mm vereisen een aanpassing van de nomogramwaarde.
De corneadiameter heeft gevolgen voor de flapdiameter. Er zal bij een klein oog meer corneaweefsel door de zuigring komen dan bij een groot oog. Met dezelfde ring en keratometrie zal de flap die verkregen wordt bij een klein oog groter zijn dan die bij een groot oog.
- **Kleine cornea's <11,0 mm:** Kies de grootste ringen voorgesteld voor de keratometrie, zoals getoond in onderstaand voorbeeld: voor een horizontale K van 43 +2 kiezen.
 - **Grote cornea's >12,0 mm:** Kies de kleinste ringen voorgesteld voor de keratometrie, zoals getoond in onderstaand voorbeeld: voor een horizontale K van 43 0 kiezen.

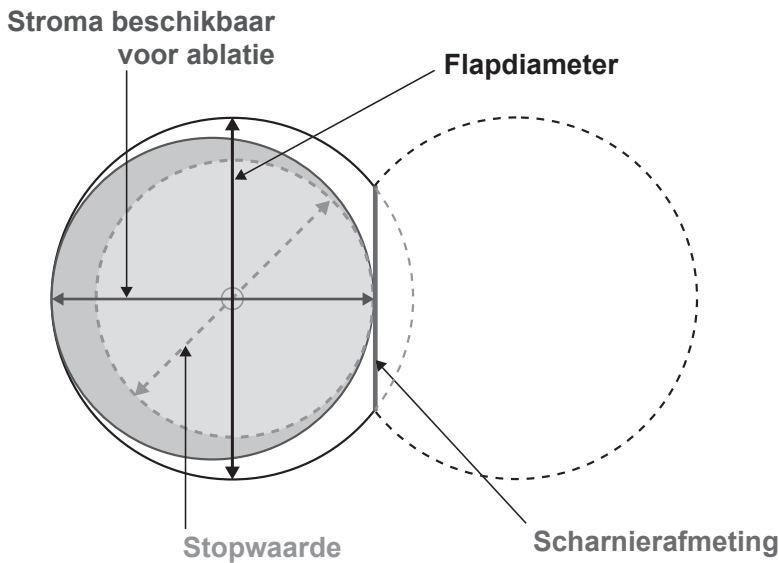

Moria raadt af om de One Use-Plus te gebruiken bij ogen met een corneadikte van minder dan 500 micron. Moria adviseert om de zuigring te centreren op de limbus. Moria beveelt aan om te kiezen tussen de snelheid 2.

De meest recente versie van de nomogram is beschikbaar op de website van MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

De prestaties kunnen afwijken t.o.v. het nomogram afhankelijk van verschillende patiëntgerelateerde factoren (IOD, graad van bijziendheid, leeftijd, geslacht, ras, keratometrie, enz.) en chirurgiegerelateerde factoren (hydratatie van de cornea, zuigtijd, enz.). Het nomogram is slechts een algemene richtlijn. We bevelen ten stelligste aan dat elke chirurg zijn eigen nomogram opstelt Moria is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor rechtstreekse, toevallige of hoge schade of gevolgschade geleden door eender welke partij, zelfs indien deze partij niet op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

PT - NOMOGRAMA PARA One Use-Plus
COM ANEL METÁLICO




Horizontal K	Anel	Cabeça	Batente	Diâmetro da aba (pressupostos)	Estroma disponível para ablação (cálculos)	Dimensão da arti- culação (cálculos)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,7	9,0	2,7
			8,5	9,8	9,2	2,4
	-1 0	90/130	8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	10,0	9,5	3,0
			8,5	10,1	9,5	2,7
	-1 0	90/130	9,0	10,2	9,7	2,4
			8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,2	9,6	2,8
			9,0	10,4	9,8	2,6
	-1 0 1	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,7	2,9
			9,0	10,4	9,8	2,6
	-1 0 1	90 / 130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
43	0 1 2	90 / 130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
45	1 2 3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			7,5	9,5	8,5	5,8
			7,5	9,0	8,3	5,0
46	2 3	90/130	8	9,8	8,9	5,6
			7,5	9,3	8,4	5,4
47	2 3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3
			8	9,5	8,8	5,1
48	2 3	90/130	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3

Determinação do K horizontal, arredondar ao valor inteiro mais próximo e seleccionar o anel de sucção e batente apropriado (para $42,5 \leq K < 43,5$ arredondar para 43).
Centrar o anel no limbus.
Para córneas com diâmetro superior a 12mm, escolher o anel mais pequeno disponível no nomograma para uma determinada ceratometria (para um K horizontal de 43, escolher o anel 0).
Para córneas com diâmetro inferior a 11mm, escolher o anel de sucção mais alto disponível para uma determinada ceratometria (para um K horizontal de 43, escolher +2).

Utilização do Nomograma

- Córneas com diâmetros entre 11.0 e 12.0 mm.**
Seleccionar o tamanho do anel e regular o batente em função da ceratometria horizontal. Arredondar o K horizontal ao valor inteiro mais próximo seguindo o seguinte exemplo :
Se $42,5 \leq K \text{ Horizontal} < 43,5$, arredonde para 43
- Córneas com diâmetros <11,0 ou >12,0 mm requerem ajustes no valor do nomograma.**
O diâmetro da córnea tem um impacto no diâmetro da aba. Maior quantidade de tecido da córnea irá sobressair através do anel de sucção com um olho pequeno do que com um olho grande. Para o mesmo anel e ceratometria, a aba obtida com um olho pequeno será superior à obtida com um olho grande.
 - Córneas Pequenas <11,0 mm:** Seleccionar o mais elevado dos anéis propostos para a ceratometria, de acordo com o exemplo seguinte: para uma K horizontal de 43, escolha +2.
 - Córneas Grandes >12,0 mm:** Seleccionar o mais baixo dos anéis propostos para a ceratometria, de acordo com o exemplo seguinte: para uma K horizontal de 43, escolha 0.

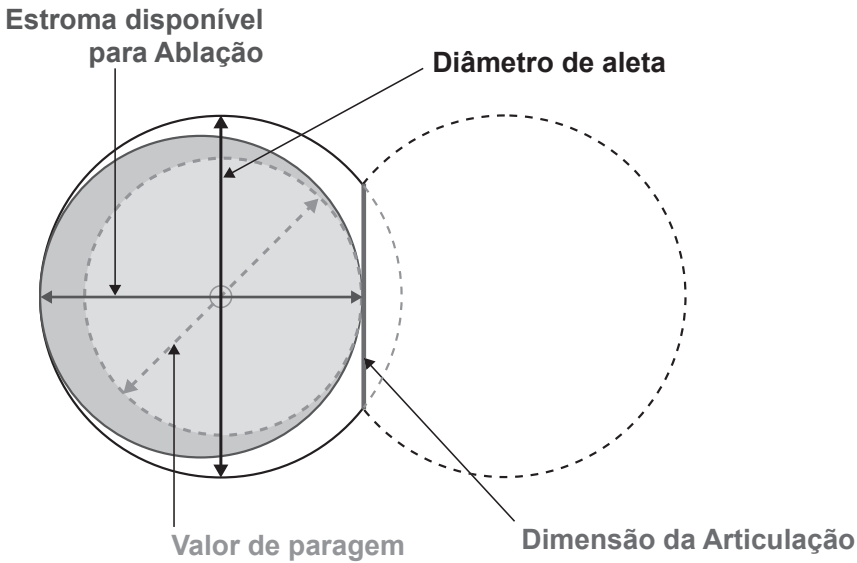

A Moria não recomenda a utilização do One Use-Plus para olhos com uma espessura da córnea inferior a 500 micrones.
A Moria recomenda a centragem do anel de sucção no limbus.
A Moria recomenda a seleccionar a velocidade 2.

A versão mais recente do nomograma está disponível no site MORIA:
<http://www.moria-surgical.com>

O desempenho pode desviar-se do nomograma dependendo de vários factores relacionados com o paciente (pressão intra-ocular, grau de miopia, idade, sexo, etnia, ceratometria, etc.) e factores associados à cirurgia (hidratação da córnea, tempo de sucção, etc.). O nomograma é apenas um guia geral. Recomenda-se vivamente que cada cirurgião estabeleça o seu próprio nomograma. A Moria não é responsável por qualquer dano directo, incidental, consequencial ou exemplar sofrido por qualquer parte, mesmo se essa parte não tiver sido avisada para a possibilidade do dano em causa.

SV - NOMOGRAM FÖR One Use-Plus
MED METALLRING




Horisontalt K	Ring	Huvud	Stopposition	Luckdiameter (antagande)	Stroma tillgänglig för ablation (beräkning)	Storlek på viking (beräkning)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5	9,7 9,8	9,0 9,2	2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,5 9,0	8,8 8,3	5,1 5,0
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0 8,5 9,0	10,0 10,1 10,2	9,5 9,5 9,7	3,0 2,7 2,4
	-1 0	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,2 10,4	9,6 9,8	2,8 2,6
	-1 0 1	90/130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5 9,0	10,3 10,4	9,7 9,8	2,9 2,6
	-1 0 1	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
43	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,8 8,3	5,3 5,1 5,0
44	0 1 2	90 / 130	8,5 8 7,5	10,3 9,8 9,3	9,4 8,9 8,4	5,7 5,6 5,4
45	1 2 3	90/130	8,5 7,5 7,5	10,0 9,5 9,0	9,3 8,5 8,3	5,3 5,8 5,0
46	2 3	90/130	8 7,5	9,8 9,3	8,9 8,4	5,6 5,4
47	2 3	90/130	8,5 8	10,0 9,5	9,3 8,8	5,3 5,1
48	2 3	90/130	8,5 8	10,3 9,8	9,4 8,9	5,7 5,6
49	3	90/130	8,5	10,0	9,3	5,3

Bestäm horisontal K, avrunda värdet till närmaste heltal och välj lämplig ring och stopp (för $42.5 \leq K < 43.5$ avrunda till 43).
Centrera ringen över limbus.
För hornhinnor med diameter över 12 mm, Välj den lägsta föreslagna ringen enligt nomogrammet (för ett horisontalt K av 43 välj 0-ringen).
För hornhinnor mindre än 11 mm i diameter, Välj den högsta föreslagna ringen enligt nomogrammet (för ett horisontalt K av 43 välj +2 ringen).

Användning av Nomogrammet

- Hornhinnor med diameter mellan 11.0 and 12.0 mm.**
Välj ringstorlek och stopposition baserad på det horisontala keratometrivärdet. Avrunda det horisontala K- värdet till närmaste heltal enligt exemplet nedan:
Om $42.5 \leq \text{Horisontalt K} < 43.5$, avrundat till 43
- Hornhinnor med diametrar <11.0 eller >12.0 mm kräver ett anpassat nomogram-värde.**
Hornhinnans diameter påverkar luckdiametern. En större mängd hornhinne-vävnad sticker upp från sugringen för små ögon jämfört med stora. Med samma ring och keratometri kommer luckan som fås på ett litet öga att vara större än dess motsvarighet på ett stort öga.
 - **Små hornhinnor <11.0 mm:** Välj den av de föreslagna keratometri-ringarna med det högsta värdet, som i följande exempel: för ett horisontellt K-värde på 43, välj +2.
 - **Stora hornhinnor >12.0 mm:** Välj den av de föreslagna keratometri-ringarna med det lägsta värdet, som i följande exempel: för ett horisontellt K-värde på 43, välj 0.

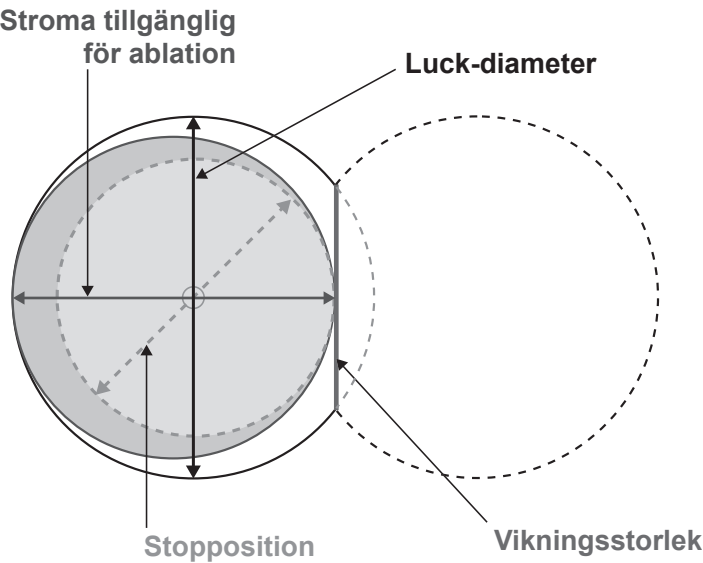

Moria rekommenderar inte användning av One Use-Plus för ögon där hornhinnans tjocklek är mindre än 500 mikrometer.
Moria rekommenderar att sugringen centreras över limbus.
Moria rekommenderar att välja hastighet 2.

Den senaste versionen av nomogrammet finns på MORIA website:
<http://www.moria-surgical.com>

Prestandan kan avvika från nomogrammet beroende på ett flertal faktorer relaterade till patienten (intraokulärt tryck, graden av närsynthet, ålder, kön, härkomst, keratometri, etc.) samt relaterade till det kirurgiska ingreppet (hornhinnans fukthalt, sugtiden, etc.). Nomogrammet är endast en generell vägledning. Det rekommenderas starkt att varje kirurg etablerar sitt eget nomogram. Moria kan inte hållas ansvarig för direkt, episodisk, resulterande eller varnande skada hos någondera part, även om denna part inte meddelats om möjligheten till sådan skada.

TR - METAL HALKALI One Use-Plus İÇİN NOMOGRAM



Yatay K	Halka	Kafa	Durdurucu	Flep çapı (tahmini)	Ablasyon için geçerli Stroma (hesaplamalar)	Menteşe boyutu (hesaplamalar)
37	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,3	8,6	2,4
38	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,4	8,7	2,5
39	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	9,7	9,0	2,7
			8,5	9,8	9,2	2,4
40	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
41	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,0	10,0	9,5	3,0
			8,5	10,1	9,5	2,7
42	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	9,0	10,2	9,7	2,4
			8	9,8	8,9	5,6
43	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,2	9,6	2,8
44	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,4	9,8	2,6
			9,0	10,0	9,3	5,3
45	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
46	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,7	2,9
			9,0	10,4	9,8	2,6
47	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
48	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
49	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
50	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
51	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
52	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
53	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
54	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
55	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
56	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
57	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
58	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
59	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
60	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
61	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
62	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
63	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
64	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
65	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
66	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
67	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
68	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
69	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
70	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
71	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
72	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
73	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
74	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
75	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
76	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
77	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
78	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
79	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
80	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
81	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
82	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
83	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
84	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
85	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
86	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
87	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
88	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
89	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
90	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
91	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
92	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
93	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
94	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
95	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
96	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
97	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0
98	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	10,3	9,4	5,7
			8	9,8	8,9	5,6
99	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	7,5	9,3	8,4	5,4
			8	10,0	9,3	5,3
100	-1 Large-Cut	110 Large-Cut 130 Large-Cut	8,5	9,5	8,8	5,1
			7,5	9,0	8,3	5,0

Yatay keratometri değerini kullanarak nomogramdan uygun ring ve durma noktası değerini seçin. Küsurlu yatay K değerlerini en yakın tam sayıya aşağıdaki örnekteki gibi yuvarlayın:

Vakum halkalarını limbusa göre merkezleyin.

Çapı 12 mm'den büyük olan kornealar için, yatay keratometri için önerilen en küçük vakum halkasını seçin (Yatay K değeri 43 ise, 0 vakum halkasını seçin).

Çapı 11 mm'den küçük olan kornealar için, yatay keratometri için önerilen en büyük vakum halkasını seçin (Yatay K değeri 43 ise, +2 vakum halkasını seçin).

Nomogramın Kullanılması

1. Çapları 11.0 ile 12.0 arasında olan kornealar.

Yatay keratometri değerini kullanarak nomogramdan uygun ring ve durma noktası değerini seçin. Küsurlu yatay K değerlerini en yakın tam sayıya aşağıdaki örnekteki gibi yuvarlayın:


$42,5 \leq \text{Yatay K} < 43,5$ ise, 43'e yuvarlayın

2. Çapları <11,0 veya >12,0 mm olan kornealar nomogram değerlerinin ayarlanmasını gerektirmektedir.

Korneal çap flep çapını etkiler. Küçük bir gözden, emme halkasıyla büyük bir göze göre daha fazla korneal doku kaldırılacaktır. Aynı halka ve keratometri için, küçük bir göz üzerinde oluşturulan flep büyük bir gözde oluşturulandan göre daha geniştir.

• **Küçük Kornealar <11,0 mm:** Yatay keratometri için önerilen halkaların en büyük olanı seçin: Örneğin; yatay K değeri 43 olan ve kornea çapı 11.0 mm'den küçük olan bir hasta için +2 vakum halkasını seçin.

• **Büyük Kornealar >12,0 mm:** Yatay keratometri için önerilen halkaların en küçük olanı seçin: Örneğin yatay K değeri 43 olan ve kornea çapı 12.00 mm'den büyük olan bir hasta için 0 vakum halkasını seçin.

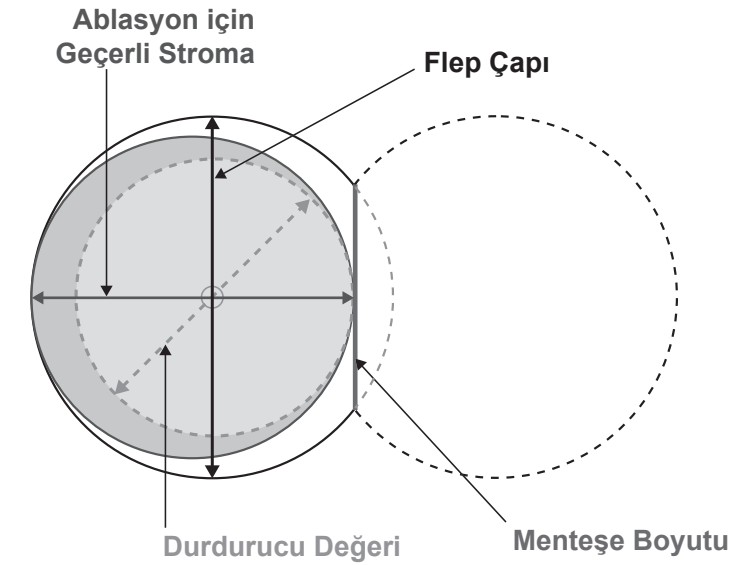

Moria, 500 mikronun altında korneal kalınlığa sahip gözler için One Use-Plus kullanımını önermemektedir.

Moria vakum halkasını limbusa göre merkezlenmesini önermektedir.

Moria hız 2 seçerek önerir.

Nomogramın en yeni versiyonunu MORIA'nın web sitesinde bulabilirsiniz:

<http://www.moria-surgical.com>

Hastadan kaynaklanan faktörlere (IOP, miyopi derecesi, yaş, cinsiyet, etnik köken, keratometri, vs.) ve cerrahi yöntemden kaynaklanan faktörlere (korneal hidrasyon, emme süresi, vs.) bağlı olarak nomograma göre performans farklılık gösterebilir. Nomogram sadece genel bir kılavuzdur. Her cerrahın kendi nomogramını oluşturması şiddetle önerilir. Moria; herhangi bir tarafça katlanılacak doğrudan, dolaylı, cezai ve başka türlü hasarlardan, söz konusu taraf böyle bir hasar olasılığına dair bilgilendirilmemiş olsa bile, sorumlu olmayacaktır.



MORIA S.A. – 15, rue GEORGES BESSE - 92160 ANTONY – France
#65067-H-03.2022

