



Punch Gardé Profond Deep Well

Sécurisez la préparation de vos greffons DMEK
avec la technologie Moria

Contrôle



Précision

Ergonomie

OPTIMISEZ LA PRÉPARATION DE VOS GREFFONS DMEK AVEC LA TECHNOLOGIE MORIA

Moria, votre partenaire pour une préparation de greffon DMEK maîtrisée

La DMEK est devenue une technique de référence de greffe de cornée¹. Néanmoins, la difficulté de celle-ci a imposé jusqu'à présent une courbe d'apprentissage élevée². Conscient de cette difficulté, Moria a développé un punch afin de vous aider à standardiser cette procédure.

Ce punch possède une base stable et ergonomique afin d'assurer un geste précis et sûr dans un confort de travail optimisé. Le puits, profond, enveloppant et disposant d'un système à double aspiration, est conçu pour garantir un maintien sécurisé de la cornée donneur pour assurer une incision soignée et nette de celle-ci. Enfin, la technologie de la lame gardée développée par Moria permet de faciliter la recherche du plan de clivage pour éviter la déchirure du greffon et préserver ses cellules endothéliales. Ce punch gardé profond est ainsi votre allié idéal pour une DMEK contrôlée et reproductible.

Le punch gardé profond, une offre adaptée à vos besoins

Votre objectif

Incision finale uniquement

Pelage périphérique + incision finale

Notre offre



LE PUNCH GARDÉ PROFOND DEEP WELL

PRÉCISION

- Lame double biseau pour une incision **précise**
- Lame sur 360° pour une profondeur d'incision **uniforme**

ASPIRATION EFFICACE

Système de succion homogène avec double aspiration permettant un **maintien optimal de la cornée**

MARQUAGE "S" FACILITÉ

4 trous cardinaux non aspirants pour **faciliter le marquage "S"** de la face stromale

ERGONOMIE

Base abaissée pour un **confort de travail optimisé**

STABILITÉ

Base large et stable avec empreinte pour une **prise en main optimale**

CONTRÔLE

Lame gardée, idéal pour la **recherche du plan de clivage**


Couvercle en acier inoxydable et base en aluminium pour assurer une **descente contrôlée**

POSITIONNEMENT OPTIMISÉ


- Rainure de centrage de 8,5mm pour un **positionnement précis** de la cornée
- Puits profond et enveloppant, épousant la forme de la cornée conçu pour **garantir sa tenue**

Fenêtres de visualisation larges pour **plus de visibilité**

Endothélium
Descemet
Stroma

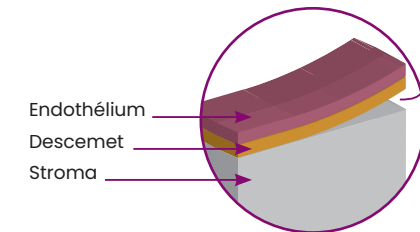

Cornée
Puits doublement incurvé
Réceptacle

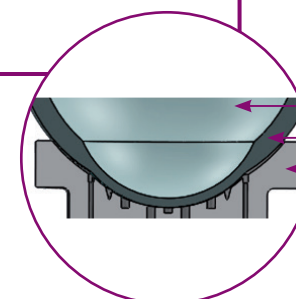

RÉFÉRENCES – PUNCH GARDÉ PROFOND DEEP WELL

• Kit complet avec une base, une lame et une seringue

Kit entier – Punch gardé seul – Usage Unique	
Références	Diamètre de découpe
Pour incision finale	
17212D750	7,5 mm
17212D775	7,75 mm
17212D800	8 mm
17212D825	8,25 mm
17212D850	8,5 mm
Pelage périphérique	
17212D950	9,5 mm
17212D1000	10 mm



• Lame seule pelage périphérique

Porte lame gardée seul – Usage Unique	
Références	Diamètre de découpe
17213D950	9,5 mm
17213D1000	10 mm



RÉFÉRENCES

- Rodríguez-Calvo-de-Mora M. Clinical Outcome of 500 Consecutive Cases Undergoing Descemet's Membrane Endothelial Keratoplasty. *Ophthalmology*. **2015**;122(3):464-470
- Debellemannière G. & al. Impact of Surgical Learning Curve in Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty on Visual Acuity Gain. *Cornea*. **2016**;36(1):1-6

- A destination des professionnels de santé
- Fabricant: Moria S.A.
- Classe du dispositif médical: Is
- Organisme notifié: GMED 0459
- Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé



MORIA #67081FR-B-04.2024

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Tél: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Tél: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Tél: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

**Moria COMMERCIAL
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Tél. Fax: +86 021 52586095
moriachina@moria-int.com