Moria

ZH 带一次性人工前房（**19182**）和输液装置（**19181**）的 **OUP LC** 环（**19187**）的使用说明

重要信息：检查包装袋的完整性以及标签上的有效期。该医疗器械是无菌的，仅供一次性使用。这些医疗器械的设计不允许重复使用。不应对其进行重复灭菌或重复使用。

如需选择一次性 OU LC 刀头的适当组合，请参阅标题为＃65090ZH *的文档。

本文档的电子版本可访问 Moria 网站：www.moria-surgical.com（限制区域 - «Resources center»标题）获取。也可应要求提供单个版本（Moria 的地址参见背面）。

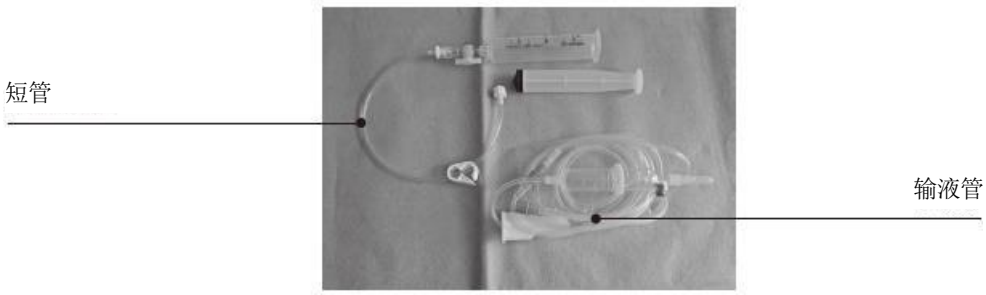


内容物

19182 一次性人工前房，带有 2 个端口（其中一个带有单向阀门阀）、前房顶盖和白色旋环

19187 OUP LC 导环和蓝色旋环

19181 输液管组，包括一根带滴注腔的输液管、延长管和一根带单向阀门阀和注射器的短管



从包装袋中取出所有无菌部件。

将人工前房底座置于桌上，并确保其稳定。

准备管组，以在人工前房中获得 **90 mmHg** 压力：



将短管连接至人工前房（不带阀门阀的端口）。

检查 2 个阀门阀是否打开。

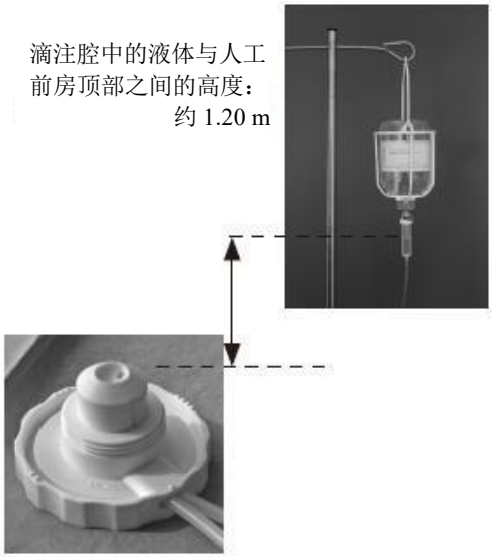


用注射器抽吸角膜保存液或生理溶液（BSS 或类似溶液）。



将注射器连接至短管。用手指按压前房顶部，使溶液充满管路（从短管到前房管的末端）。关闭人工前房阀门。

***** 用于人工前房的一次性大尺寸切割（OU LC）刀头的使用说明



在滴注腔和人工前房顶部（角膜）之间将输液瓶升高至 ***1.20 m*** 的高度，以确保获得 ***90mmHg*** 的压力。

将输液瓶与输液管相连接。打开空气阀。清洗管路，并使用滚轮关闭该系统。

检查通向人工前房的输液管中不存在气泡。将输液管连接到人工前房阀门口，并释放输液管的滚轮，同时保持前房阀门关闭。

将供体植片置于人工前房：

建议：使用边缘最小直径为 16 mm 且角膜精确居中的供体植片。

如果需要，可在内皮上施用粘弹剂



使用注射器将角膜保存液或 BSS 轻轻注入系统。将供体供体植片置于前房顶部，内皮向下。用镊子轻轻掀起供体植片，以消除可能的气泡。



将角膜精确对准台上的中心，然后小心地将盖子放在正确的位置（将对位点插入插槽中）。检查供体植片是否居中良好。将白色锁环放在盖子上以密封人工前房。

打开人工前房的阀门至少三秒钟。然后关闭人工前房阀门，以保持 90 mmHg 的压力。检查 ***2*** 个阀门阀是否关闭。

如果需要，用眼压计检查压力。

供体供体植片切割：

主要步骤：

- 去除上皮并干燥角膜表面
- 测量角膜厚度
- 如果需要，用眼压计检查压力
- 将 OU LC 刀头的导环放在盖子上，并用蓝色旋环将其拧紧
- 使用用于 AC 的 OUP 手柄和适当的 OU LC 刀头进行切割（请参阅文件＃65090ZH）。

取出供体植片并丢弃器械：

切割完成后，拧下导环。

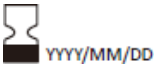
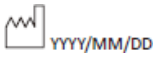
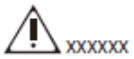
为防止可能的供体植片塌陷，请打开人工前房的阀门，拧下白色旋环，然后轻轻提起盖子以抓住供体植片。

现在准备将供体植片放在 Moria 冲压刀上修正以获得所需的直径。

在手术结束时，将一次性人工前房及其附件、OU LC 刀头和一次性管路丢弃至适当的容器中进行处置（根据现行法规）。

注意（仅限美国）：美国联邦法律规定，本器械仅限医师销售或凭医嘱销售

符号说明

	产品编号
	包装数量
	有效期
	批次代码
	环氧乙烷灭菌
	不得重复使用
	制造商
	制造日期
	注意：请参阅随附文件
	请参阅操作说明
	如果包装破损，请勿使用
	避免暴晒
	保持干燥
	丢弃在单独的收集箱中
	注意（仅限美国）：美国联邦法律规定，本器械仅限医师销售或凭医嘱销售。

注册人/生产企业：MORIA S.A 法国目利亚股份有限公司
住所：27, rue du Pied de Fourche, 03160 Bourbon L'Archambault, France
生产地址：27, rue du Pied de Fourche, 03160 Bourbon L'Archambault, France
联系电话： +33 (0)1 46 74 46 74
传真：+33 (0)1 46 74 46 70

代理人/售后服务单位：上海目利亚贸易有限公司
住所：上海市长宁区淮海西路 432 号 6 楼 H 室
联系方式：86 021 52586095

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进 20173166477

生产日期：见标签
使用期限：见主机说明书

Moria #65109ZH-C-10.2026

如需获取更多信息

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
電話+33 (0)1 46 74 46 74
傳真+33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
電話(800) 441 1314
傳真 + 1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
電話 81-3-6260-8309
傳真 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

Moria COMMERCIAL (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
District, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路**432号**
凯利大厦**6楼08室**
電話/傳真 +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria